


# 说明书

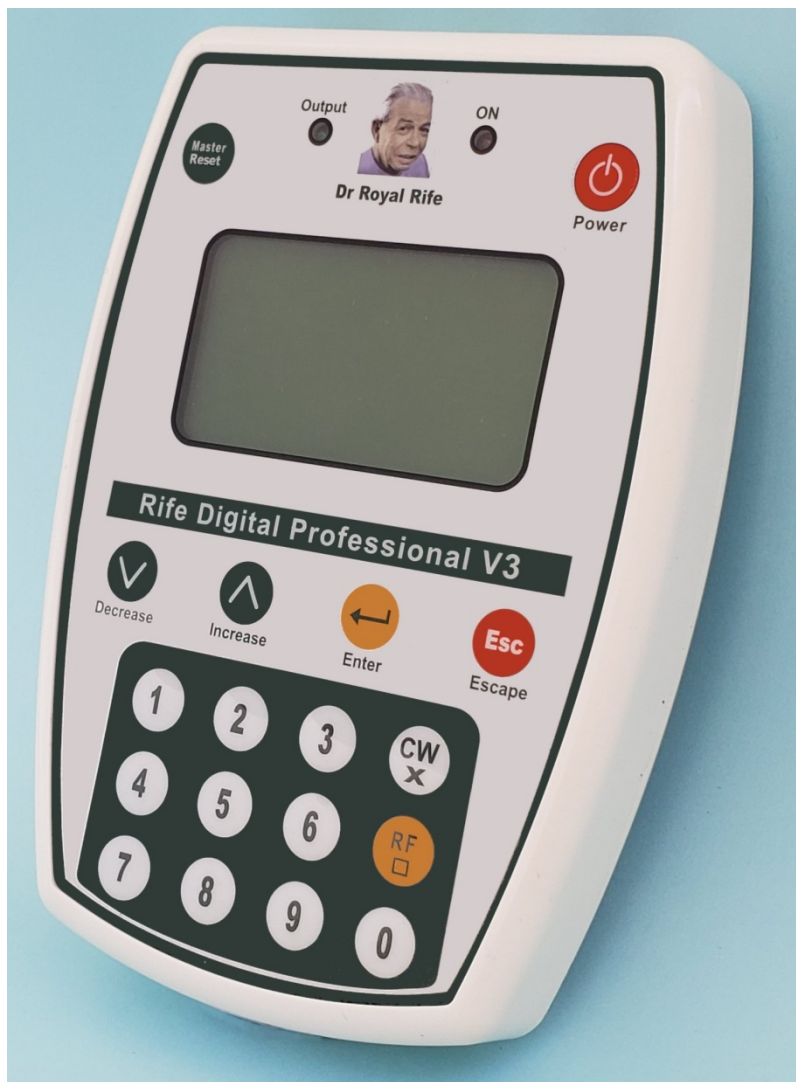

用于专业型 V3 系列  
英语 / 日语 / 西班牙语  
© 八月 / 2020 - © 2022

索引	页 2
介绍	页 3
. 技术信息	页 4
. 怎样穿绑带	页 5-6
. 专业型 V3 键盘	页 7-8
. 专业型 V3 系列	页 9
. 快速入门和电压调节	页 10-11
. 设置语言(英语 / 日语 / 西班牙语)	页 12
<b>专业型 V3 自动功能</b>	
. 超级扫描	页 13-14
. 聚合扫描	页 15-16
<b>25 组合: 菜单下的选择</b>	页 17
. 组合选择与命令	页 18-19
. 模式: 运行	页 20-22
. 模式: 脉冲—运行	页 23
. 模式: 扫描	页 24-26
. 模式: 脉冲—扫描	页 27
. 模式: 编程	页 28-31
. 20 个预设组合列表	页 32-33
. 功能: (RF) 无线频率	页 34
. 功能: (CW) 载波	页 35
. Rife 数字专业性 V3 CPU 升级:	页 36
. 功能: 主机—重置	页 37
. 常见问题	页 38-41
<b>治疗建议</b>	页 42-44
. 警告, 赫氏反应, 建议	页 45-47
. 技术数据规格表	页 48-49
. ETDFL 介绍, 免责声明	页 50-51
. 联系, 销售, 英语服务	页 52

## 介绍:

恭喜您购买专业型 V3 系列电疗设备 (ETD)。以下指南为电疗的介绍，并向您提供设备使用的建议。同时提供的还有为您的设备修订过的官方 ETDFL 频率表，寄生虫的介绍和肝脏清理的介绍。对此我们强烈推荐。我们祝愿您治疗一切顺利，您的新设备能为您带来正面的体验。

**注意:** 此仪器为带有超高频输出能的电疗设备。请认真阅读本手册，并严格遵照指示使用治疗仪器。

## 基础知识:

### **ETD 的电疗有什么作用？**

- 电疗可用于应对某些病毒，细菌，寄生虫等等。电疗的原理与顺势疗法类似：使用自然原理来治疗身体。我们周围的每样东西都带有电荷，因此我们总是暴露在特定的电磁频率中。如果你带有某种病毒，那么它将生存在特定的电磁场中。让我们简单地假设，它只生存在单个频率中。当你用 ETD 产生的同样频率的电波照射你的身体(带有特定电波)，病毒会受到过度刺激并死亡。
- 使用电疗来恢复活力和健康：每个生理过程都会在体内产生谐波共振。每种病症都会在生物体内引起电场紊乱。常见的背部疼痛，肺、肝脏等的排毒过程使身体的紊乱共振变回谐波共振。带有 4 个绑带连接的子午线治疗对这种过程特别有效。
- 使用电疗来解毒。排出器官中的重金属、化学物质和其他不需要的毒素。
- 使用电疗来治疗所有疾病。

# 技术说明

## 频率范围

0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)

## 25 治疗程序

- 20 独特的治疗组合
- + 5 个额外的(空) 用户可编程组合
- 每组由 10 个治疗频率组成。
- 可通过出厂复位恢复预设。
- 所有 25 个组合可以重新编程

## 频波和边带

3 30 MHz 微处理器 产生方波 RF/CW，通过实验室测试的方波。  
正弦波束

## 载波和射频热切换

在 100% 频率上，实验室测试过的谐波波形周期。超多机器模式 I  
兼容 110 & 281 CW/RF.

## 输入电压

19v DC / 4500 mA (110 V / 250 V SMPS) 全球电压兼容, 外部直  
流开关-模式 电源适配器。

## 真可变输出电压 (使用示波器)

12.5v, 14.5v, 100% 正偏移 17v 直流(

## 50% 电压可变输出 (使用万用表)

可变 6v, 7v, 100% 正偏移直流 8.5v 万用表无法同时检测频率波与  
电压)

## CPU 工作温度 (安全) \*


26° - 33° 摄氏度

78° - 90° 华氏度 (正常工作温度)

## 双 RCA 输出插口

2 RCA 插口, 1 副手部绑带, 1 副足部绑带

## 怎么穿绑带

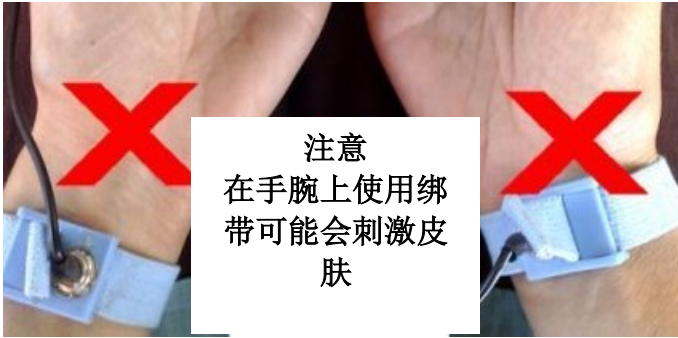


进行连续几个小时治疗（如通宵）的最佳地方是脚底，用不锈钢电极连接脚底。脚底有非常厚的皮肤，能耐受长时间的电疗。

我们建议将绑带的蓝色导电涂层接触脚底。不锈钢电极必须始终接触鞋底。

### 穿绑带的正确方式



将皮带移动到手掌上

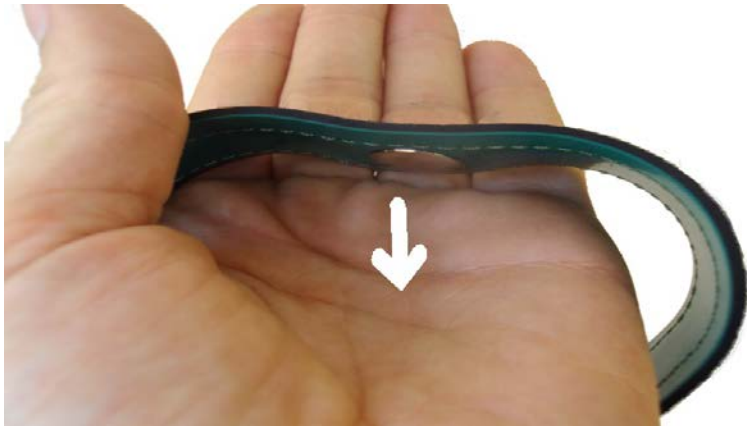

银色电极朝向手掌



或将绑带绑到你的脚底（推荐）

## 专业型 V3 : 键盘



主机 与 开关键  
重置,



or



Enter

输入键: 选择所有菜单项



Escape键: 移动到上一个菜单



上 与 下: 上下移动菜单



载波, 热切换(见页 35)



无线电波频率(见 页 34)

0 to 9


按键 0 - 9:编程模式时用于输入频率代码的按键.





## 快速入门: 专业型 V3 系列

- ▶ 将电源适配器连接到电源插座
- ▶ 将电源线连接到机器上
- ▶ ON灯指示连接成功
- ▶ 您可以将第一条线插入 # 1
- ▶ 您可以将第二条线插入 # 2

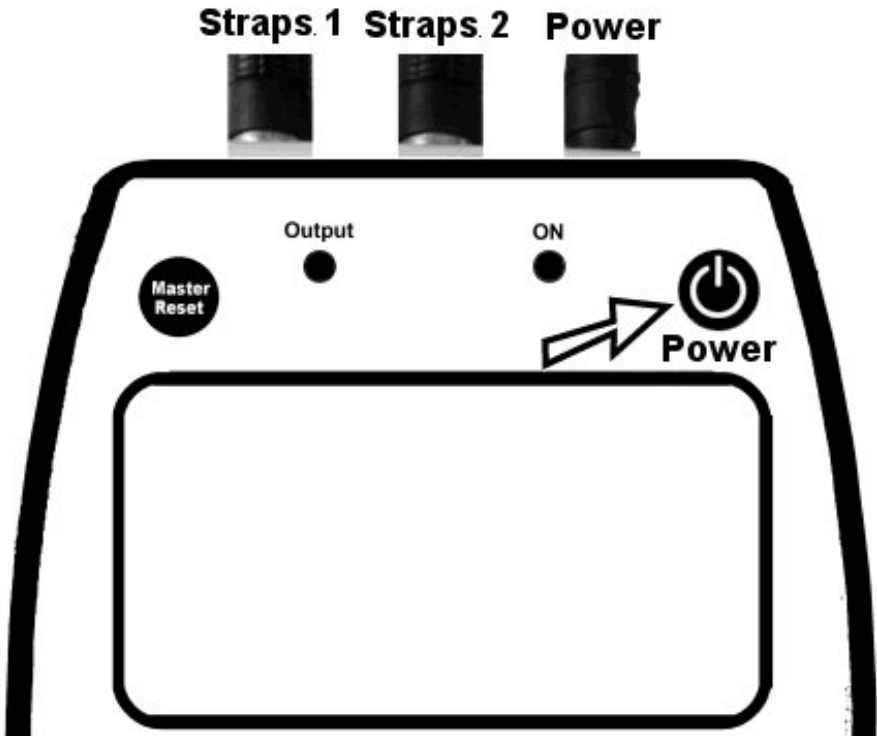

- ▶ 按电源按钮启动机器
- ▶ LCD显示器将打开
- ▶ 将显示机器型号和信息


## 快速入门:

► 首先按位于左上角的 **MASTER RESET** 键启动新机器。这时会立即进入电压（灵敏度）和语言菜单。组合 21 - 25 中的所有预设值都将被设置为零



## 电压:

► 第一个菜单是电压。电压预设为 17v。这是 Rife Digital 的默认值，并且不应更改。该电压电平提供最有效的治疗效果。

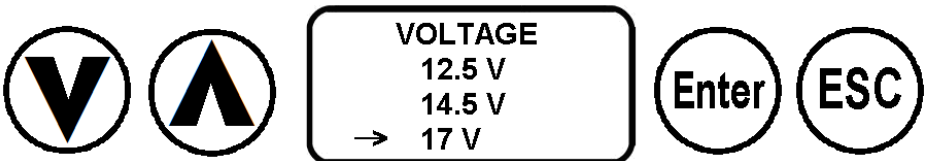


仅降低电压用于：

- ▶ 治疗幼儿
- ▶ 对频率输出非常敏感
- ▶ 敏感引起皮肤发红或皮疹
- ▶ 直接在皮肤上使用 **Rife** 治疗垫

许多先进的工具，如波束只能用于 17v 电压，减少波束的功率将导致波束附件功能失效。

严重疾病频率程序均设置为 17v 电压，因此想要有效治疗，请将电压设置在 17v

在电压菜单中可用的键

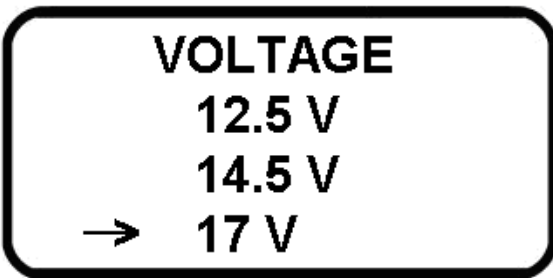

## 语言:

► 专业型 V3 机器 内置三种语言: 英语 (默认), 日语和西班牙语。

语言菜单:



在电压菜单中可用的键



英语是默认语言，选择不同的语言会使整个机器显示您可能不理解的新语言，因此如果需要将机器重新设置为英文，请记住“主机重置”按键。

## 菜单: 超级扫描 / 介绍

超级扫描功能允许用户设置每个频率到高达 100 万 Hz 或 (999.99kHz)

由于每一个可用的频率都被输出给用户，用户可以体验不同类型的电疗，这在特定频率不能提供快速疗效的情况下非常有效。

在主菜单上超级扫描很容易找到，只需按 **ENTER** 键即可开始超级扫描。您可以在循环中的任何时候再次按 **ENTER** 键暂停，然后再次按 **ENTER** 恢复循环。


对 **ETDFL** (频率列表) 中列出的“疾病治疗”频率组合，建议每个频率使用至少 10 分钟;

当然在超级扫描模式中，运行所有频率并不会有害。..

## 模式: 超级扫描 / 可用按键



▶ **ENTER: Play:** 当屏幕上出现 Play 时，设备输出开启，（ON）指示灯亮。Play 模式中，几乎所有的其他键都被锁定，您可以在播放模式中连接绑带并开始治疗。显示屏上显示的频率是正在输出到绑带的。

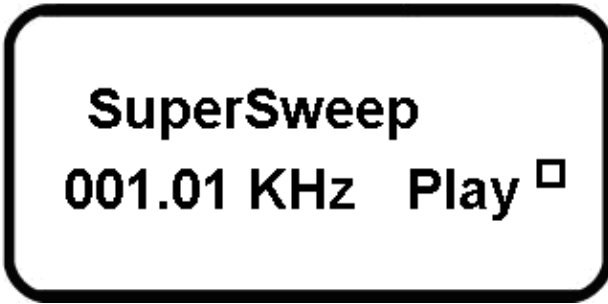

▶ **Pause:** 再次按 ENTER 键暂停程序。这也会解锁所有可用的按键

▶ **ESC:** 按 ESC 键从“暂停”返回上一级菜单。

▶ 载波（CW）和射频（RF）模式可在 PLAY 模式中切换。（热切换）。有关 CW&RF 的信息，请参见第 34 - 35 页

## 菜单：聚合扫描

聚合扫描是设备的新功能，允许用户使用超级扫描高级版本的功能体验双频输出（2 个频率同时）。

输出频率从 000.01 到 999.99  
同时输出频率从 999.99 到 000.01。

由于每一个可用的频率都被输出给用户，用户可以体验不同类型的电疗，这在特定频率不能提供快速疗效的情况下非常有效。


在主菜单上聚合扫描很容易找到，只需按 **ENTER** 键即可开始聚合扫描。您可以在循环中的任何时候再次按 **ENTER** 键暂停，然后再次按 **ENTER** 恢复循环。

超级扫描周期一般的时间为聚合扫描。

## 模式：聚合扫描键



- ▶ **ENTER: Play:** 当屏幕上出现 **Play** 时，设备输出开启，（ON）指示灯亮。Play 模式中，几乎所有的其他键都被锁定，您可以在播放模式中连接绑带并开始治疗。显示屏上显示的频率是正在输出到绑带的。

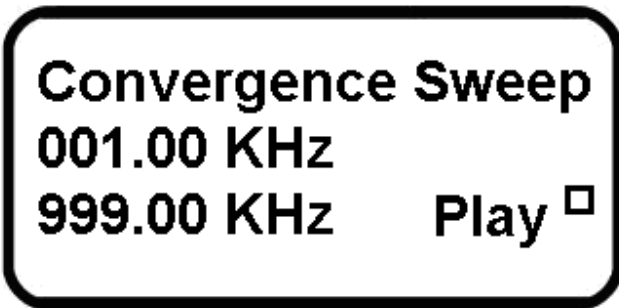

- ▶ **Pause:** 再次按 **ENTER** 键暂停程序。这也会解锁所有可用的按键
- ▶ **ESC:** 按 **ESC** 键从“暂停”返回上一级菜单。
- ▶ **载波（CW）和射频（RF）模式可在 PLAY 模式中切换（热切换）。有关 CW&RF 的信息，请参见第 34 - 35 页**



## 25 组合: 菜单下的选择

- ▶ 使用增/减键来选择菜单



- ▶ 机器(菜单)从 #1 组合开始



- ▶ 可用的预设组合为 #1 - #20 每组包含 10 个频率
- ▶ 组合 #21 - #25 为空。是存储您自己的频率选择的好地方
- ▶ 如果您需要超过 5 个自定义的组合，可以擦除 #1-#25 所有的组合。

## 组合选择与命令

▶ 用 ▲ 上 ▼ 下 键选择组合#1 - #25 后, 按 ENTER 键



现在可用的组合命令有:

▶ **RUN:** 在当前所选组的位置 #0 上运行单个频率。

有关 RUN 的更多信息, 请参见第 20-22 页

▶ **EJECUCIÓN DEL PULSO:** 在当前所选组的位置 #0 上运行单个频率

有关 EJECUCIÓN DEL PULSO 的更多信息, 请参见第 23 页

► **SWEEP:** 在当前所选 #0 - #9 组运行全部 10 个频率  
，每个频率 10 分钟

有关 SWEEP 的更多信息，请参见第 24 - 26 页

► **PULSE SWEEP:** 在当前选择的组 #0 - #9 中运行所有 10 个频段，每个频率 10 分钟，频率脉冲每秒会开启和关闭

有关 PULSE SWEEP 的更多信息，请参见第 27 页


► **PROGRAM:** 重新编程当前组

有关 PROGRAM 的更多信息，请参见第 28-31 页

## 模式: 运行

运行功能用于设备上单个频率的“播放”。运行命令播放用户从“组合”10个频率列表中选择的频率

由于专业 V3 模式 I 包含“25 组”，用户可以立即运行任何组的任意单个频率

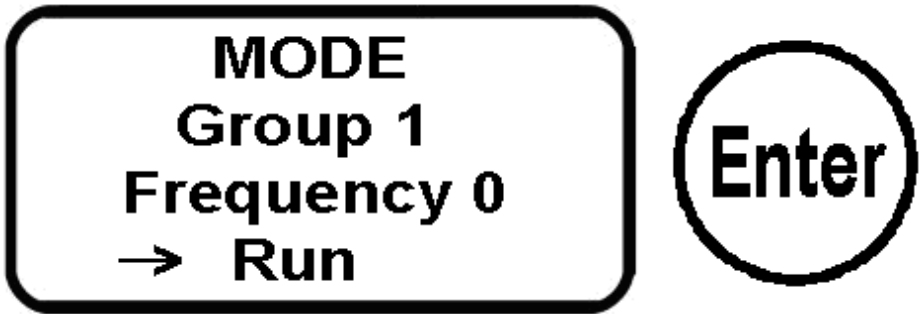

使用▲上和▼下键选择任意单个频率

ETDFL（频率列表）的 35000 个频率中的任何一个都可以被马上编程到设备中;所以用户可以在所需时间内“运行”所选频率

运行命令是一个纯粹的“手动”模式，没有预设的时间。因此，用户可以选择 **RUN** 命令来播放任意时间长度的一个频率；几个小时甚至几天。


一旦您按了按 **ENTER** 键，您选择的组将会显示，还有该组中的频率位置，以及 **KHZ** 的数字。**PLAY** 显示输出。如果您再次按 **ENTER** 键，程序将暂停。

**Group 1**  
**Frequency 0**  
**→ Run**  
**001.01 KHz Play □**

**注意：**

我们建议大家使用扫描模式（参见 24-26 页）而不是运行模式，因为在自动（扫描）或（脉冲扫描）模式中使用多个频率进行有效的疾病治疗是最好的。

## 模式: 运行 (播放) / 可用按键

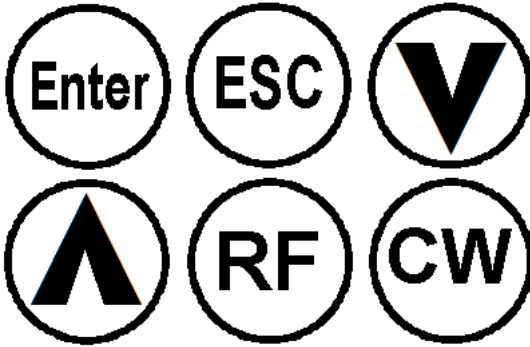

▶ **Play:** 当屏幕上出现 **Play** 时，设备输出开启，（**ON**）指示灯亮。Play 模式中，几乎所有的其他键都被锁定，您可以在播放模式中连接绑带并开始治疗。显示屏上显示的频率是正在输出到绑带的。

▶ **Pause:** 再次按 **ENTER** 键暂停程序。这也会解锁所有可用的按键

▶ 在 **PAUSE** 模式中按加/减键来选择其它频率

▶ **ESC:** 返回。只在 **Pause** 模式中工作。

▶ 载波（**CW**）和射频（**RF**）模式可在 **PLAY** 模式中切换。（热切换）有关 **CW&RF** 的信息，请参见第 34 - 35 页

## 模式: 脉冲运行

脉冲运行功能与“RUN”模式相同，除了机器每秒脉冲一个频率，而非“RUN”模式的固定非脉冲。

脉冲使用一个特殊的处理器在关闭瞬态“存储”和“积攒”能量，然后在快速扫描中将储存能量的脉冲回身体;提高频率的效能，集中波形，将能量输入到身体更深处有利于更有效地治疗。

贝克博士通过将原来 Rife 设备的电路输出通过一个老照相机上取下的佳能闪光灯转换，发现了这种方法。Beck 博士发现，储存能量脉冲输出比通过标准固定输出方法治疗效果更好。您的 Pro-设备中使用现代微芯片技术，用了相同的脉冲方法。

▶ 请按照 RUN 说明使用“Pulse RUN”模式。脉冲运行除了每秒脉冲开关外，与 RUN 命令相同。

## 模式: 扫描 - 介绍

扫描功能是所有原来 ETD 设备上可以找到的定时播放功能。“SWEEP”模式每 10 分钟播放 25 组频率任意一个。

一个频率集合将持续 100 分钟（1 小时 40 分钟）。扫描模式连续循环，除非您暂停或 ESC（退出）返回到菜单。这样就可以让用户在不用暂停的情况下通宵治疗。


如果您希望扫描模式时缩短治疗时间，可以选择菜单程序“脉冲-扫描”。脉冲扫描每 20-30 秒运行一次所有的组合预设频率。脉冲扫描仅适用于专业型 V3 系列。

扫描已经被证明是最有效的模式，集成在 ETD 机器上使用了 6 年多。客户反馈已经证实，原来的 ETD 模式（Sweep）已被证明对所有类型的病症都有效。



## 模式: 扫描 - 说明:


通过选择 SWEEP 来运行一个组合内的 10 个频率。

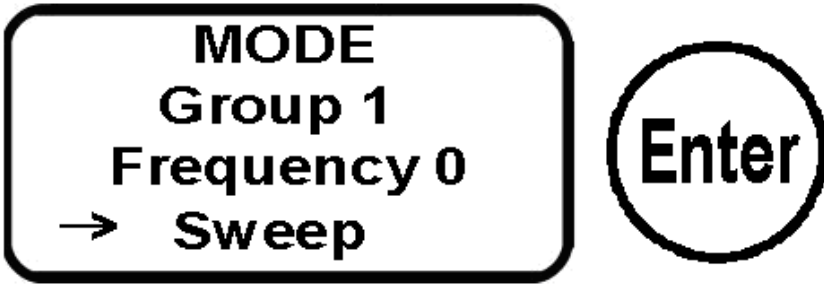

一旦您按了按 ENTER 键，您选择的组将会显示，还有该组中的频率位置，以及 KHZ 的数字。PLAY 显示输出。如果您再次按 ENTER 键，程序将暂停。 .

**Group 1**  
**Frequency 0**  
**→ Sweep**  
**001.01 KHz Play** □

模式: 扫描 (播放) / 可用按键

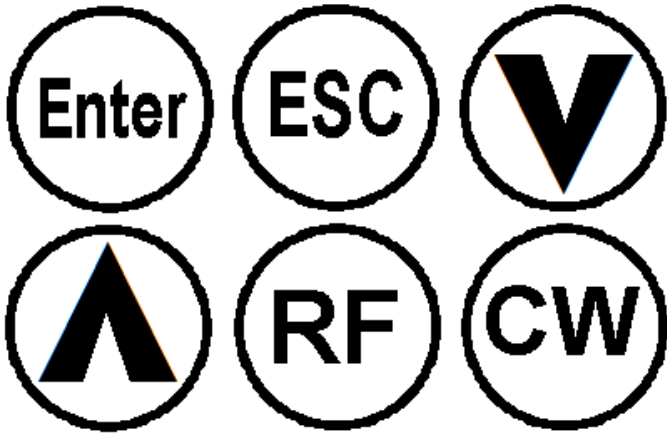

▶ **Play:** 当屏幕上出现 Play 时，设备输出开启，（ON）指示灯亮。Play 模式中，几乎所有的其他键都被锁定，您可以在播放模式中连接绑带并开始治疗。显示屏上显示的频率是正在输出到绑带的

▶ **Pause:** 再次按 ENTER 键暂停程序。这也会解锁所有可用的按键

▶ 在 PAUSE 模式中按加/减键来选择其它频率

▶ **ESC:** 返回。只在 Pause 模式中工作。

▶ 载波（CW）和射频（RF）模式可在 PLAY 模式中切换。（热切换）有关 CW&RF 的信息，请参见第 34 - 35 页

## 模式：脉冲扫描 / 介绍

脉冲扫描功能与“扫描”模式相同，除了除了机器每秒脉冲 10 个频率，而非“扫描”播放的每个频率 10 分钟（非脉冲）。

脉冲使用一个特殊的处理器在关闭瞬态“存储”和“积攒”能量，然后在快速扫描中将储存能量的脉冲回身体；提高频率的效能，集中波形，将能量输入到身体更深处有利于更有效地治疗。

贝克博士通过将原来 Rife 设备的电路输出通过一个老照相机上取下的佳能闪光灯转换，发现了这种方法。Beck 博士发现，储存能量脉冲输出比通过标准固定输出方法治疗效果更好。您的 Pro-设备中使用现代微芯片技术，用了相同的脉冲方法。


▶ 请按照”扫描“命令来使用“脉冲扫描”模式。脉冲运行除了每秒脉冲开关外，与扫描命令相同。

## 模式：编程

▶ 使用 ▼▲ 箭头来从组合 1 到组合 21 - 25 之间移动



▶ 组 #21 - #25 是没有预设的空组。这里是存储你的程序的好地方

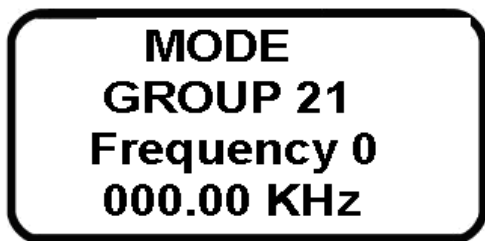

▶ 组 #21 - #25 是没有预设的空组。这里是存储你的程序的好地方

▶ 按设备上的 ENTER 键选择组 #21，您可以看到默认频率为零

▶ 使用 ▼▲ 箭头选择另一个频率槽，或者简单地从频率 0 开始编程（最简单）


▶ 按 ENTER 键选择默认频率槽 #0



▶ 使用键盘输入频率，然后按 ENTER 确认



▶ 在下面的这个例子中，我们用 123.45Khz 代替 000.00Khz 频率

**MODE**  
**GROUP 21**  
**Frequency 0**  
**123.4  KHz**

▶ 按 ENTER 键锁定（示例）频率 123.45 KHz

**Enter**

**MODE**  
**GROUP 21**  
**Frequency 0**  
**123.45 KHz**

频率 **0**: 正在闪烁

▶ 现在按▲向上箭头移动到下一个频率：频率 1



频率 1 : 现在可以被编程

## 20 个预设组合列表

第 1 组：

关节炎，风湿病和骨质疏松症

第 2 组：

哮喘和过敏综合症

第 3 组：

STD 综合，

第 4 组：

肝炎，A，B，C 型肝炎

第 5 组：

牙科综合，口腔健康

第 6 组：

癌症综合

第 7 组：

转移（器官）癌综合症

第 8 组：

Rife 博士的专业 MOR CW 频率

第 9 组：

阿尔茨海默病和其他痴呆症

第 10 组：

革兰氏阴性菌感染（感冒和流感）



第 11 组：  
病毒综合

第 12 组：  
高血压（高血压）

第 13 组：  
心脏病与 COPD 综合

第 15 组：  
赫尔达克拉克寄生虫

第 16 组：  
癌症：乳房

第 17 组：  
脑障碍与脑疾病

第 18 组：  
霉菌（一般）和人类真菌症状

第 19 组：  
疼痛，一般：

第 20 组：  
压力障碍（一般）

第 21 - 25 组：用户可编程组。

## 功能: (RF) 无线电频率:



- ◀ 在“播放”模式中使用任何 RF。
- ◀ RF 和 (CW) 载波之间热切换
- ◀ PLAY 右侧显示的□指示 RF 开启

我们记录的信息显示，Rife 博士的与生物共鸣的真正 M.O.R. 是肯尼迪型号中使用的高频频率 110,281 和 Rife 机器中使用的 Rife 射线 #4，以及在 Rife 临床光束中使用的高频谐波频率。Rife 博士的所有机器都在 RF 频率上工作，而不是音频。根据飞利浦·霍兰德的光束射线机的频谱分析，我们知道它仅将音频用于一个目的，以创建边带谐波间距的方法来击中真正的 RF M.O.R.s. 的高次谐波频率。亨利·塞纳报道飞利浦·霍兰德的设计在显微镜观察下杀死了生物。很多使用这些器械的医生也说说他们有许多疾病被治愈。这表明飞利浦·霍兰德的谐波方法是不容置疑的

## 功能: (CW) 载波:



# Play X

- ◀在任何“PLAY”模式中使用 CW。
- ◀在 CW 和 (RF) 射频之间进行热切换
- ◀X 显示在播放的右侧，表示 CW 开。

我们的文件信息表明原始的 **Beam Ray** 临床仪器可以与 (CW) 载波一起工作。

ETD 的专业模式 I 可以在 3.3 MHz 的高频载波频率转换为原始 **Rife Beam Ray** 器件的模拟模式，并具有音频 (RF) 频率组合，它们共同产生边带频率。

这种边带频率与真正的 **Rife M.O.R** 频率一起，可以祛除有害微生物。

载波是 **Rife** 博士用于治疗 16 名晚期病人的原始 **Rife** 仪器中使用的模式。

## **Rife 数字专业型 V3 CPU 升级:**

ETD Labs 使用最新的微芯片技术，合并了原始的 Rife 机器模式 I 110 和 Rife 机器模式 I 281 指令，同时输出两个高 RF（无线电）频率。

这种创新可以将从 10 赫兹以上的低音频调制成 I281 模式的高 RF +载波（CW）频率。我们使用最新的微芯片技术和独特的超精密编程算法，研究了 6 个多月才将两台 Rife 机器合并在一起。

作为两个强大的运行 CW（载波）Rife 机器的代表 Rife 数字专业型 V3 分别为 110 和 281。

这些技术也被转移到 Zapper 数字专业型 V3 模式 I，这样 Rife 技术的进步也被传递给了 Clark 专业模式 I。

## 功能: 主机重置:



◀用户复位主机以清除所有组中的所有频率，并将机器重新设置为出厂配置。出厂默认值请参见第 32 - 33 页。

▶主机复位仅将 20 个 PRESET 组重置为出厂默认值（第 32 - 33 页），并将组 21 - 25 中的所有内容擦除为零（0.00）

▶主机复位需要 1 秒钟才能完成

▶主机复位只能在初始启动 MENU 功能下工作，不会进行模式，运行或任何其他“运行模式”

▶请注意不要意外按下主机复位，否则您必须通过键盘将已保存的 20 组 - 25 组频率重新键入机器。

▶使用主机复位将机器恢复为英文（默认）语言和 17v（默认）电压

## 常问问题:

问: CW 或 RF 使用哪个更好?

答:

载波 (CW) (默认) 是最好的模式, 因为它是基于原始的 Rife Beam Device。 (RF) 后续的肯尼迪型号中, 为第二选择。

问: 我自己编程到机器中的频率在哪里?

答: ETDFL (频率) 在本书的最后一节。内容是英文, 因为多种语言都使用英语医学术语和医疗描述。

问: 我可以将本设备连接到外部 12v 汽车或太阳能电池吗?

答: PRO V3 系列需要 19v, 因此如果直接使用电池, 则需要使用 12v-19v 变压器。大篷车和露营者可以将电源适配器安全地插入货车的电源插座。适配器可用于美国插座 (110v) 或其他国家 (220v, 230v, 240v)

联系 [Healthproducts2@gmail.com](mailto:Healthproducts2@gmail.com) 获取外部电池选择  
美国商店中太阳能电池便携式设备, 可以在没有电的地方运行 PRO V3 系列

问：可以 2 人使用机器吗？

答：是的，可以 2 人使用机器。Pro 系列顶部有 2 个端口，允许 2 个电缆。

- 一次只能有一组
- 双频输出仅在聚合扫描模式下可用

最多可以在机器上存储 25 人的程序，这可用于诊所准备，可以提前处理多达 25 个客户。

问：：我的专业 ETD 机器有什么保修？

答：12 个月国际保修涵盖所有国际国家，退货邮费适用于英国，美国，澳大利亚以外的国家

问：批量购买有折扣吗或我可以成为经销商吗？

答：是的批量有折扣。联系您所在地区的经销商。英国，欧盟，美国和日本地区的联系方式在后面。

问：我不喜欢绑带，你有替代吗？

答：是的。“最新的 Rife 治疗垫”是一个单面导电的“治疗垫”，您可以躺在，不用皮带和电线连接。它是背部疼痛以及任何其他治疗方案的绝佳选择。床垫可从美国和英国商店获得，并可直接在这里订购：

（美国）

[www.healthproducts2.com](http://www.healthproducts2.com)（治疗垫显示在主页上）

（UK）

[rifedigital.net/order](http://rifedigital.net/order)（“治疗垫包”在购物车页）

在美国，使用 USPS（美国）邮政服务发货，所有其它国家也可使用。Rife 治疗垫只能连接到“PRO&PRO V3”系列。

在英国和欧盟，“Mat Pack”用皇家邮政发货和跟踪

问：从阅读“Rife 日报”之后，我知道 Rife 博士在 1940 年的“型号”Rife 机器中使用了绑带，但是我也知道他使用了灯光作为治疗方案。你会出售专业机器的 Rife 灯吗？

答：德国的 ETD 实验室现在正在研究 Rife 灯，以适应 Rife 数字专业模式 I。这已经是一个持续的 2 年的项目，因为频率传输到灯需要大量的研究，也是对选择人员的试验。我们预计 2020 年 - 2022 年发售的“Rife 灯”，不过目前我们还没有确切的日期。



问：当我与客户合作时，我需要一些额外的皮带和电缆，因此需要额外的配件

答：

- 魔术贴
- 柔性表带
- 额外的线索
- **Rife** 治疗垫
- 太阳能便携式电池组
- 可从美国商店获得，可以直接在这里订购：  
[www.healthproducts2.com](http://www.healthproducts2.com)（主页上显示的绑带。国际客户也可以购买）

对于英国和欧盟，其他国家：

- **Rife** 治疗垫
- 可从 [rifedigital.net/order](http://rifedigital.net/order)（或电子邮件 [rifedigitaluk@gmail.com](mailto:rifedigitaluk@gmail.com)）

日本

- **Rife** 治疗垫，魔术贴皮带，导线
- 联系国际商店

## 治疗建议

### 一般建议:

如果您刚接触这种治疗方式，或者如果您长期以来没有使用过专业型 V3，我们建议缓慢开始治疗。在<扫描>模式中，每天最多运行一个周期，可能分为两个疗程（5 个频率，隔几个小时，另外 5 个）。

几天的保守治疗后，您可以将治疗时间增加到每天 2 次<扫描>。如果您经常与设备配合使用，则可以使用附带的脚带通宵治疗 7 - 9 小时。这样您可以在睡眠期间完成 3 到 4 个周期，会有非常好的效果。一般来说，睡眠不会受干扰;许多用户甚至表述，他们在电疗治疗之后感觉更清醒。

ETD 频率表列出了数千种疾病和疾病，和对应的 10 个频率。有时选择很简单，比如您感冒了，那么只需使用“常见感冒”的频率，并将机器设置为<扫描>。更复杂的疾病状况可能需要个性化的方案。

### 一般疾病治疗:

寄生虫清除，感冒或流感治疗，念珠菌或皮肤疾病，细菌，病毒感染和排毒可以视为一般治疗方法。这些疾病可以在 21 到 30 天的时间内消除

对于普通寄生虫治疗，我们建议：

寄生虫综合：克拉克博士（PRESET # 15）

对 ETD 每个频率编程，每个频率 10 分钟。许多人在晚上使用 ETD，前 21 天每天或晚上休息或睡觉时使用 7-9 小时。将绑带在双脚上，金属面接触鞋底。对所有上述频率进行编程，并允许频率每隔 100 分钟循环一次。

如果您不知道怎么处理的情况，只要根据上述说明，使用机器的默认频率预设，按<扫描>键运行频率。

## 严重疾病治疗：

严重的疾病通常需要更长的治疗期，通常每几周改变频率。我们的设备已成功用于治疗数千人严重疾病。每一次结果表明，延长的治疗期产生了最佳的治愈效果。

夜间延长时间更加方便，没有日间活动或工作日程的中断。与脚掌相连的通宵治疗能穿透身体器官，使得能够进一步治愈。例如，以前肠是不能通过早期频率装置达到的器官；现在有了 **ETD**，可以清除在肠道和其他器官（如肝脏，肾脏，胆和胃）的寄生虫和病原体。然而，这需要时间，您需要使用与病原体或寄生虫密切共鸣的频率。为此，我们建议使用<扫描>模式，因为它在循环周期中每 10 分钟变换 10 个频率。每个频率与治疗程序共鸣，以便治疗特定的疾病状况。

由于 **ETD** 使用自然的频率，因此严重疾病状况缓解的时间要三个月。天然药物在一个更微妙和更长的时间内以这种方式工作。再次，通过加长的通宵治疗时间可以获得最佳效果。

## 怎样选择频率：

如果您的症状不容易识别，那么有几种方法来选择治疗方案：

- 选择正确的频率或频率设置，您可以用运动检查（肌肉测试，基于身体已经知道需要的原则；您可以与运动医师一起，或者为家庭学习此技术）。一些客户使用锤子，这也很容易学习。

- 电疗设备能够给出非常精确的诊断文件。这些通常用于顺势疗法（**Vega** 机）或天然治疗实践（**Bioresonance-Devices**），如 **Quantum SCIO**。这些都是基于相同的原理，从一个完全健康的身体开始，然后测量和诊断不健康的身体中存在的和谐。你可以找这样一个诊所，得到一个诊断文件，然后用自己的设备处理自己。

- 在本书中大多数疾病频率，可能会随着时间的推移而改变，变成新的定义。如果找不到频率，您可能看的错误地方：例如：皮肤癌将被列为“

癌症，皮肤”。或者绦虫将被列为“寄生虫，绦虫”。如果无法找到，可以通过电子邮件向机器供应商咨询正确的频率设置，或者下载本书的 PDF 版本，并使用 Adobe PDF “搜索” 命令查找疾病名称。

- 如果您定期使用 ETD，会发现另一个重要的作用：您将更好地了解您的身体，并将对该疗法的过程变得更加敏感。您将能够评估疾病，更准确地选择您治疗。您将能够识别更多健康状况的频率，并在需要时引入新的频率。

## 治疗注意事项

你不能用这些治疗方法“做错事”。（例如）您可以消除特定的寄生虫，如果您没有这种寄生虫，则不会对身体产生影响。研究表明病原体生活在特定的频率范围。如果与其他共振的病原体或寄生虫频率范围交叉，可能会消除该物种。如果长时间治疗（5 天）后感觉不到症状改变，我们建议您更换频率组。ETD 频率提供其他频率选项，以协助进一步治疗。

## 什么是 Herxheimer 反应?

当您开始电疗时，许多寄生虫和病原体会被杀死。这会给你的免疫系统压力，导致恶心，疲劳和头昏眼花。这被称为“**Herxheimer 效应**”，或“**寄生虫灭绝综合症**”，是血液和组织中毒素的免疫系统反应。这种肝脏和其他器官的超载首先会使您的症状恶化。这可以是几个小时，但也可以持续 **2-3 天**，然后开始变好。重要的是症状的恶化并不意味着治疗失败了;事实上恰恰相反。

## 当 Herxheimer 反应发生时该怎么办?

接受这种身体反应，作为治疗的确认结果。如果是非常严重的话，那么减少治疗时间，喝大量的水（每天至少 **4L**），休息（不要运动！），不要让你的消化系统有负担，给你饮用水加入新鲜的柠檬汁，并确保消化系统正常工作（推荐使用 **Epsom 盐**或天然泻药）。从电疗疗程休息几天，直到你康复。

## ETD 警告

- 建议孕妇不要使用。
- 起搏器：您可以与起搏器一起使用，但是要保持机器皮带距离胸部位置超过 **12 英寸（英寸）**。
- 有人建议在嗜酸乳杆菌的带宽中产生的频率输出（**346.05,347.00,348.00,349.00,350.00,351.65,352.00,353.00,354.00,355.00**）可能在一些人中引发念珠菌病（念珠菌病）。如果您的治疗方案范围在这种天然胃肠道菌群的带宽范围内，那么请每天从保健食品店购买“**Pro Biotic**”补充剂。嗜酸乳杆菌也存在于天然酸奶，**Kefir** 和 **Kombucha** 中。

## 重要的提示：

在少数情况下，使用的 **ETD**，皮肤上可能会有刺痛的感觉。通常只有在皮肤敏感的皮肤上使用腕带，例如腹部，手腕或其他柔软的皮肤区域时才会发生。为避免这种情况，请仅在手掌或脚底使用腕带。

尽管在上述刺痛感觉皮肤敏感区域的长时间使用皮带，可能导致局部皮疹。如果您真的需要在这些地点治疗，请每隔几分钟移动一下皮带，以防止刺痛。较长时间治疗的最佳场所是手掌和或脚底。

您可以将专业型 **V3** 上的电压从 **17v** 切换到 **14.5v** 或 **12.5v**，以减少过敏问题。电压预设为 **17v**。这是 **Rife Digital** 的默认值，不能更改，因为 **17v** 的电压提供了最有效的疾病治疗。

仅降低电压用于：

- ▶ 治疗幼儿
- ▶ 对频率输出非常敏感
- ▶ 敏感引起皮肤发红或皮疹
- ▶ 直接在皮肤上使用 **Rife** 治疗垫

进行几个小时的治疗（如过夜）的最佳位置是在脚底上，以不锈钢按钮触及脚底。脚底有非常厚的皮肤，能耐受长时间的电疗。

(图) 如何在脚上最有效地固定绑带的示例



## 机器可靠运行的建议

我们建议将机器放置在玻璃台面，木质床头柜坚固的表面上，也可放置在大理石或类似表面的地板上。

不要将机器放在床上，地毯，枕头或衣服上。


如果程序 00.01 - 00.04 kHz 上的绿灯亮起，请不要惊慌

当使用 00.01 - 00.04 的“超低频”频率时，绿灯可能会闪烁，表示机器正在运行低频组。非常低的频率组 00.01 - 00.04 是最有效的解毒范围，因此，安装了闪烁的指示灯，以便医生和卫生专业人员能够监控其客户。

低范围的排毒装置可能会导致一些客户的小疱疹反应。这种解毒范围允许快速消除身体中的病原体和细菌，这可能导致一些小反应，例如短暂的冷，这很少持续超过几个小时。

本机已通过多年质量保证的持续运行。

## 技术数据

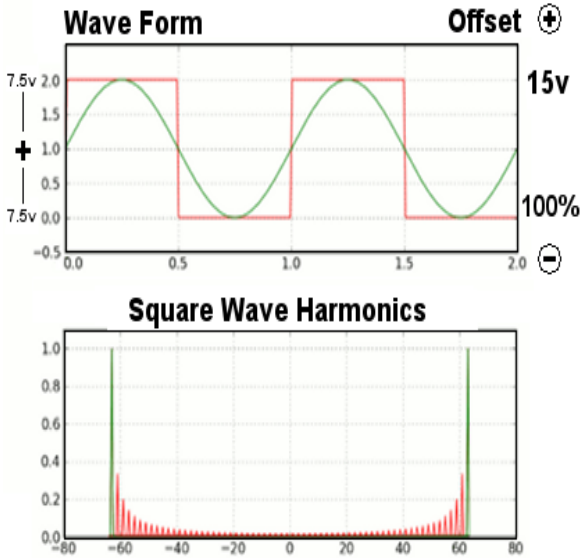

## DAC

DAC 的数字频率在从 ETD 发送之前被转换为模拟信号。这些数模转换器也称为 DAC。ETD 信号通过 DAC，然后通过低通或带通滤波器完成模拟转换。所产生的频率是一个非常精确的模拟频率，具有该模拟频率的所有泛音和底色。

数字芯片产生的模拟频率比大多数频率发生器更精确。最重要的是，在从 ETD 输出之前，频率将被转换为模拟。转换为模拟数字产生的频率是最准确的。当转换为方波时，这些模拟频率产生方波谐波，如（2）所示，使用载波阻抗产生无线电频率。



## 波形类型

波型是方波，消除病原体和疾病治疗的最可靠的波形。在脉冲模式下，专业 V3 模式 I 的占空比在标准模式 I 和 10% - 90% 方波占空比下固定为 50%。（图 1）根据 Dr. Rife Beam Ray 机器规格，当使用带有 Rife Professional V3 的光束时，波形将切换到正弦波。

## 电压和电压

由示波器测量的电压输出将精确测量加到方波（8.5v）底部的方波（8.5V）的顶部，以产生 17v 的输出

通过万用表测量的输出将仅准确测量方波（8.5V）的顶部。读数是瞬时的，不会计入真实的测量值（ $8.5 + 8.5 = 17v$ ）。

所以请注意，如果您用万用表测量 ETD 上的输出，请确认显示的测量值仅反映 ETD 设备总输出的 50%。这种异常与大多数万用表无法准确测量波形的电压有关。如果有疑问，请用专业的示波器测试 ETD 输出。直流电源的电流输出为 4500ma。

## 和谐频率

频率在波输出序列中产生从高到低和高的进展的谐波（图 2）。频率的谐波包括该频率的泛音和色调。在像 ETD 频率发生器这样的器件中，谐波是无限的。因为谐波不仅可以获得频率本身的治疗效果，还会使病原体难以排除给定的频率。

## ETD 频率列表介绍

ETD 频率列表（The Electro Therapy Device Frequency List Edition Aug 2020 - 2022）的修订版针对各种疾病和疾病，为 ETD 的用户提供了一个清晰全面的手册。

本书已经对原来的 CAFL 频率列表进行了修改，以便与您的设备一起使用，所有可编程频率都以千赫兹（kHz）表示。

### 电疗设备清单 (© ETDFL Association)

本书是由医学研究人员编写，他们使用 Dr Rife 专业型 V3 机器与 Quantum SCIO Bioresonance 设备，发现在各种 RIFE 频率设置下治疗患者成的频率。治疗成功后，医生记录了特定疾病的频率范围。然后在这本小册子中记录。

本书中的频率对应使用数字电疗设备的治疗方法。他们不一定总是治愈疾病，但将有助于缓解许多疾病和疾病。许多寄生虫疾病可以通过 ETD 频率列表中列出的特定频率程序进行治疗和治愈。

本书的所有频率均为千赫兹（KHz）。1KHz 对应于 1000Hz（即 30000Hz = 30.00KHz）。数字设备的范围从 000.01 KHz 到 999.99 KHz（约 1 MHz（兆赫兹）），可以将频率组以这种形式直接编程到数字频率设备中。

这本小册子中的频率从控制台上直接输入您的机器，以改善症状，治愈各种疾病或身体疾病。

## ETDFL

E.T.D.F.L i 是全球 12 个诊所正在合作进行的一个项目。诊所使用 Quantum SCIO 生物共振机来记录实际客户的疾病频率，生成 10 个最准确的频率，这些频率被认为适合用皇家 Rife 机器进行治疗。该项目始于 2006 年，原 CAFL 频率列表停止使用，由新的 ETDFL 代替，现在全球有超过 10 万台皇家 Rife 机器被用户使用。每个国家的诊所和家庭中，客户的疗效可以看出频率列表的准确性。

**ETDFL** 每年更新一次。最新的 PDF 版本可在：  
[ETDFL.com](http://ETDFL.com) 找到

[ETDFL.com](http://ETDFL.com) 的 ETDFL PDF 版本允许您搜索 ETDFL 数据库疾病频率，这可能比本书中提供的列表更新。

该数字专业型 V3 设备已被许可使用所有 ETDFL 皇家 Rife 频率组©2020  
- 2022 ETDFL 柏林 德国

### 免责声明

E.T.D.F.L.（[ETDFL.com](http://ETDFL.com)）协会不保证本书中的皇家 Rife 频率可以治愈任何特定疾病。该列表是由电疗医务人员编制的指南，他们在每个列出的特定频率上获得了成功的疗效。.

## 国际销售和咨询

美国/加拿大/澳大利亚/世界  
销售和服务(web) [www.rifedigital.com](http://www.rifedigital.com)

(E) [healthproducts2@gmail.com](mailto:healthproducts2@gmail.com)

USA ☎ 206-708-6408

国际 ☎ 0011-1-206-708-6408

英国和欧盟,

东欧与全球

伦敦英国商店, 经理: Rosalie

(web) [www.rifedigital.net](http://www.rifedigital.net) (E): [rifedigitaluk@gmail.com](mailto:rifedigitaluk@gmail.com)

(web) [www.drclark.co.uk](http://www.drclark.co.uk) (E): [clarkzappersuk@gmail.com](mailto:clarkzappersuk@gmail.com)

UK ☎ 07376056374

国际 ☎ 0044 7376056374

日本: この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引  
ウェブサイト [rifedigital.jp](http://rifedigital.jp)

マネージャー ピーター・ウィリアムズ博士

E メール [rifedigital@gmail.com](mailto:rifedigital@gmail.com)



© 2020-2022, 电疗设备 柏林 德国

© 2020-2022, ETDFL 柏林 德国

**Accessories Available at: ETDFL.COM**

► **Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet**

- Flex Straps:
- Velcro Straps:
- Wires (Button Cables):



► **Dr Rife Treatment Mats**

- 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat)



► **3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt)**




► **Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology**  
**Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat ([www.beamer.tech](http://www.beamer.tech))**



**SMD Light Technology: Available at: [ETDFL.COM](http://ETDFL.COM)**

**►Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat**

- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders.

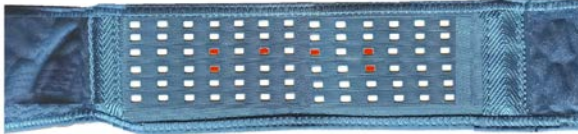

**►Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT**

- For the treatment of every type of Sprain and Injury.



**►Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat**

- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss Treatment



• ►**Dr Rife Beam Ray™** Cancer Treatment Sinewave Modulated Digital Waveform Light Mat

