

# Gebrauchsanleitung



**Für den Professional V3 Series**

© ETDfL Berlin, Germany

© 2020 - © 2022

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	Seite 2
<b>Einleitung</b>	Seite 3
. Technische Informationen	Seite 4
. Anlegen der Bänder	Seite 5-6
. Der Professional V3 Eingabetastatur	Seite 7-8
. Der Professional V3 Series	Seite 9
. Schnellstart und Einstellung der Stromspannung	Seite 10-11
. Sprachauswahl (Englisch / Japanisch / Spanisch)	Seite 12
<b>Automatische Funktionen auf dem Professional V3</b>	
. Super Sweep	Seite 13-14
. Convergence Sweep	Seite 15-16
<b>25er Gruppe: Auswahl im MENÜ</b>	Seite 17
. Gruppe Auswahl und Befehle	Seite 18-19
. Modus: RUN	Seite 20-22
. Modus: PULSE-RUN	Seite 23
. Modus: SWEEP	Seite 24-26
. Modus: PULSE-SWEEP	Seite 27
. Modus: PROGRAM	Seite 28-31
. Liste der 20 PRESET Gruppen	Seite 32-33
. FUNKTION: (RF) Radio Frequency	Seite 34
. FUNKTION: (CW) Carrier Wave	Seite 35
. Rife Digital Professional V3 CPU Upgrade:	Seite 36
. Funktion: Master-Reset	Seite 37
. FAQ	Seite 38-41
<b>Behandlungsempfehlungen</b>	Seite 42-44
. Warnung, Herxheimer Reaktion, Empfehlungen	Seite 45-47
. Technische Daten	Seite 48-49
. Einführung in ETDFL, Rechtsbelehrung	Seite 50-51
. Kontakt, Verkauf, Service auf Englisch	Seite 52

## **Einleitung:**

Glückwunsch zum Kauf Ihres Professional V3 Series Elektro Therapie Gerätes (ETD). Die vorliegende Gebrauchsanleitung vermittelt Ihnen eine Einführung in die Elektrotherapie und Tipps zum Gebrauch Ihres Gerätes. Desweiteren ist eine offizielle, an Ihr Gerät angepasste, ETDFL-Frequenzliste enthalten. Außerdem ist eine Einführung zu parasitären Erkrankungen sowie Beschreibung zur Leberreinigung enthalten, die wir besonders empfehlen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute bei Ihrer Therapie und viele positive Erfahrungen beim Gebrauch Ihres neuen Geräts.

**Vorsicht:** Es handelt sich um ein Gerät zur Elektro-Therapie mit einer hohen elektronischen Spannung. Lesen Sie diese Broschüre genau und benutzen Sie Ihr Gerät zur Elektrotherapie genau wie beschrieben.

## **Grundlegendes:**

**Wozu kann eine Elektrotherapiebehandlung mit dem ETD genau genutzt werden?**

- Nutzen Sie Elektrotherapie zur Bekämpfung von bestimmten Viren, Bakterien oder Parasiten. Sie wirkt ähnlich wie die Hömeopathie: durch den Gebrauch von natürlichen Prinzipien zur Genesung des Körpers. Alles um uns herum ist elektrisch aufgeladen und besitzt somit eine bestimmte elektrische Spannung – wir sind ihr immer und überall ausgesetzt. Falls Sie an einem bestimmten Virus erkrankt sind, lebt dieser in einem bestimmten elektrischen Spannungsfeld. Nehmen wir vereinfacht an, der Virus lebt in einer einfachen elektrischen Frequenz. Wenn Sie die gleiche elektrische Spannung mit Hilfe des ETD (durch spezielle Wellen) Ihrem Körper zuführen, wird der Virus überreizt und zerstört.
- Nutzen Sie Elektrotherapie zur Stärkung der Vitalität und Gesundheit: Die Programme produzieren eine harmonische Resonanz im Körper. Jedes Symptom führt zu einer elektrischen Dissonanz im Körper. Mit den Programmen gegen Rückenschmerzen, Entgiftung von Lunge, Leber etc. wird die

Dissonanz in eine harmonische Resonanz umgewandelt. Diese Programme sind besonders Wirksam bei Meridian-Therapien in Verbindung mit einer Kombination von vier angeschlossenen Hand- und Fußbändern.

- Nutzen Sie die Elektrotherapie zur Entgiftung: Entgiften Sie Schwermetalle, chemische Substanzen und Gifte in den Organen
- Nutzen Sie Elektrotherapie für die Behandlung von vielen anderen Krankheitsformen

## **Technische Beschreibung**

### **Frequenzbereich**

0:01 kHz - 999.99 kHz (1 MHz)

### **25 Behandlungsprogramme**

- 20 einzigartige Behandlungsgruppen
- + 5 (blanko) Zusätzliche Benutzerprogrammierbare Gruppen
- Jede Gruppe besteht aus 10 Behandlungsfrequenzen.
- Voreinstellungen können durch Fabrikeinstellungen wiederhergestellt werden.
- Alle 25 Gruppen können umprogrammiert werden

### **Frequenzwelle und Seitenband**

30 MHz Mikroprozessor RF / CW Frequenz mit quadratischer Wellenform; Labor getestet quadratische Welle. SINE Welle auf Strahlenbündel

### **Trägerwelle und Radiofrequenz Hot Swap**

Labor getestete harmonische Wellenform periodisch auf 100% Frequenzen. Rife Machine Modell 110 & 281 CW / RF kompatibel.

### **Spannungseingang**

19V DC / 4500 mA (110 V / 250 V SMPS) Alle Weltspannungen möglich, externer DC-Schaltnetzteil-Adapter.

## **Genauer Spannungsausgang (mit Oszilloskop)**

12.5v, 14.5v, 17v DC mit 100% positivem Offset

## **50% Spannungsausgang Variable (mit Multimeter)**

Variable 6v, 7v, 8.5v DC mit 100% positivem Offset (Multimeter kann keine Spannung gleichzeitig mit einer Frequenzwelle erkennen)

## **CPU Betriebstemperatur (sicher) \***

26 ° - 33 ° Celsius

78 ° - 90 ° Fahrenheit (normale Betriebstemperatur)

## **DUAL Cinch-Ausgang**

2 RCA Cinch, 1 Satz Handbänder, 1 Satz Fußriemen

## **Wie sollten die Bänder getragen werden?**




Falls die Behandlung für einige Stunden durchgeführt werden soll (wie z.B. in der Nacht) wird empfohlen, die Bänder an der Fußsohle anzulegen und zwar so, dass die Edelstahl-Knöpfe die Unterseite des Fußes berühren. Die Haut an dieser Stelle ist vergleichsweise dick und ist hierdurch auch für eine längere Elektrotherapie geeignet.

Desweiteren empfehlen wir, die Bänder am besten so anzulegen, dass die blaue leitfähige Beschichtung die Unterseite des Fußes

berührt. Unabdingbar ist jedoch, dass die Edelstahl-Knöpfe die Unterseite des Fußes berühren.

### **Korrektes Tragen der Bänder:**

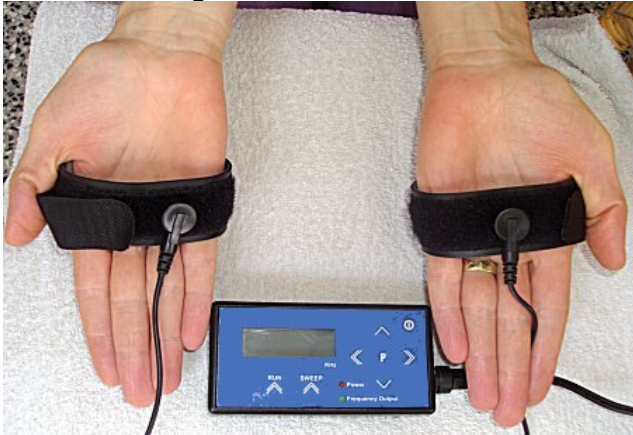

**Führen Sie die Bänder bis zur Handinnenfläche**



**Der Silberne Knopf muss die Handinnenfläche berühren**



Oder legen Sie die Bänder an der Fußsole an (empfohlen)

## Der Professional V3 : Eingabetastatur



Master  
Reset-  
Knopf,



und Einschaltknopf



Enter

or



Enter: Auswahl aller Menüpunkte



Escape: Rückkehr zum vorherigen Menü




Hoch und Runter: Wechsel zum vorherigen/nächsten Menü



Carrier Wave Wechselbarkeit (siehe Seite 35)



Radiofrequenzwelle (siehe Seite 34)

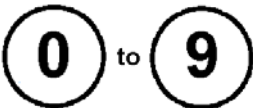


Tasten 0 - 9: Eingabe der gewünschten Frequenz im Programmmodus.





## **Schnellstart: PRO V3 SERIES**

- ▶ Schließen Sie den Netzadapter an die Steckdose an
- ▶ Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an
- ▶ Das ON-Licht zeigt eine erfolgreiche Verbindung an
- ▶ Stecken Sie das einzelne Band in den Anschluss Nummer 1
- ▶ Stecken Sie den Zweiten in den Anschluss Nummer 2

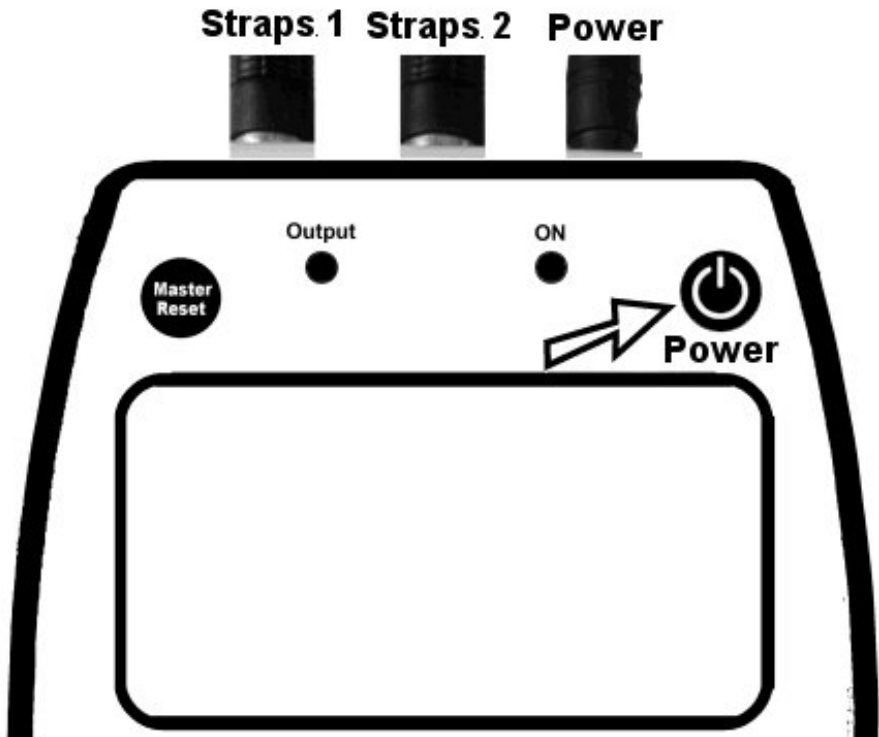

- ▶ Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten
- ▶ LCD Display wird eingeschaltet
- ▶ Machine-Typ und Info werden angezeigt

### **Schnellstart:**


- ▶ Zuerst starten Sie die neue Maschine mit dem MASTER RESET in der oberen linken Ecke. Dies ermöglicht einen sofortigen Zugriff auf die Einstellungen für die Spannung (Empfindlichkeit)

und das Sprachmenü. Alle Voreinstellungen auf der Gruppe 21 - 25 sind auf Null gesetzt



## Spannung:

► Das erste Menü heißt VOLTAGE. Die Spannung ist auf 17v voreingestellt. Dies ist die Voreinstellung für Rife Digital und sollte nicht geändert werden. Diese Spannungsebene bietet die effektivste Behandlungsstufe.

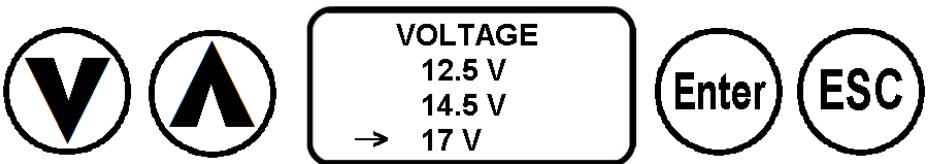

Reduzieren Sie die Spannung nur für/bei:


- Die Behandlung von kleinen Kindern
- hoher Sensibilität gegenüber elektronischer Frequenzen

- ▶ Sensibilität führt zu Rötungen und Hautausschlag
- ▶ Nutzen Sie eine Rife Healing Mat direct auf der Haut

Viele fortschrittliche Einstellungen, wie Beam-Ray funktionieren nur bei 17v, sodass eine Reduzierung der Spannung des Beam-Rays dazu führt, dass das Beam-Ray-Zubehörteile nicht richtig funktionieren

Die Frequenz-Programme für schwierigere Erkrankungen sind alle auf der 17V-Spannung eingestellt. Um eine effektive Behandlung zu garantieren, belassen Sie die Spannung bitte bei 17v

Tastenfunktionen im VOLTAGE-Menü

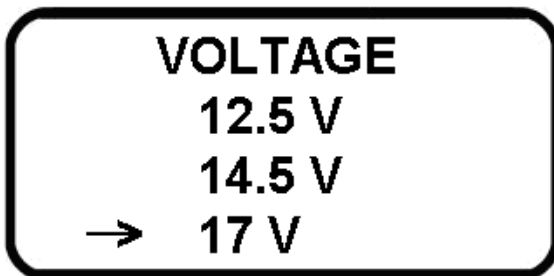



## Sprachauswahl:

► Beim Professional V3 Gerät können drei Sprachen ausgewählt werden: Englisch (Standart), Japanisch and Spanisch.

Sprachmenü:



Tastenfunktionen im Sprach-Menü



Englisch ist als StandardEinstellung ausgewählt, bei einem Wechsel in eine andere Sprache werden alle Funktionen in der neuen Sprache angezeigt. Falls wiederum ein erneuter Wechsel aufgrund der fehlenden linguale Kenntnisse nicht möglich ist, nutzen Sie den "MASTER RESET", um die StandardEinstellung wieder herzustellen.

## **MENÜ: SuperSweep / Einführung**

Super-Sweep ist eine Funktion auf der Gerät, die es dem Benutzer ermöglicht, jede Frequenz bis zu 1 Million Hz oder (999,99 kHz) zu erhöhen.

Da in diesem Fall jede einzelne verfügbare Frequenz an den Benutzer abgegeben wird, kann dieser eine intensivere Art von Elektrotherapie-Heilung erleben, die in solchen Fällen helfen kann, in denen andere Frequenzen keine schnellen Ergebnisse liefern würden.

Super Sweep ist einfach im Hauptmenü zu finden. Wenn Sie ENTER drücken, beginnt der Super Sweep "Playback". Sie können den Ablauf zur jeder Zeit pausieren, indem Sie erneut ENTER drücken. Möchten sie die Behantsetzen, können Sie wiederum auf ENTER drücken.

Es wird empfohlen, die verschiedenen Frequenzen für mindestens 10 Minuten pro Frequenz auf die spezifischen "Krankheitsbehandlungs"-Felder anzuwenden, welche in der ETDFL (Frequenz Liste) umrissen sind.

Es ist jedoch kein Problem, alle Frequenzen bei Gelegenheit im Super Sweep Modus auszuprobieren

## Modus: SuperSweep / Vorhandene Tasten



► ENTER: Wiedergabe: Wenn PLAY auf dem Bildschirm erscheint, ist Geräteausgabe eingeschaltet und das (ON) –Lämpchen leuchtet. Fast alle anderen Tasten sind im Wiedergabemodus gesperrt. Sie können die Bänder befestigen und mit der Behandlung beginnen. Die auf dem Display angezeigte Frequenz wird an die Bänder abgegeben

**SuperSweep**  
**001.01 KHz Play** □

- ▶ **Pause:** Drücken Sie ENTER erneut um in das PAUSE-Programm zu Wechseln. Hierdurch werden auch die zuvor blockierten Tasten entsperrt
- ▶ **ESC:** Drücken Sie die ESC Taste um aus dem Pauseprogramm wieder in das vorherige Menü zu wechseln
- ▶ **Carrier Wave (CW) und Radio Frequency (RF)**  
Diese sind im PLAY-Modus umschaltbar. (HOT SWAP)  
Siehe Seite 34 - 35 für weitere Informationen zu CW & RF



## **MENÜ: Convergence Sweep**

Convergence-Sweep ist eine neue Funktion auf dem Gerät, die es dem Benutzer ermöglicht, einen Dual-Frequenz-Ausgang (2 Frequenzen gleichzeitig) mit einer erweiterten Version der Super-Sweep-Funktion zu nutzen.


Frequenzen von 000.01 bis 999.99 ausgegeben sowie Frequenzen von 999,99 bis 000.01 werden gleichzeitig abgegeben.

Da jede einzelne verfügbare Frequenz an den Benutzer abgegeben wird, erhält der Benutzer eine besondere Art der Elektrotherapie, die in Fällen helfen kann, bei denen andere Frequenzen keine schnellen Ergebnisse liefern können.


Der Konvergenz-Sweep-Modus ist einfach zu finden im Hauptmenü. Nachdem dem Drücken der ENTER-Taste beginnt der Super Sweep "Playback". Sie können die Behandlung jederzeit pausieren, indem Sie erneut ENTER drücken. Durch erneutes drücken von ENTER wird das Programm fortgesetzt.

Konvergenz Sweep läuft ½ die Zeit einer SuperSweep Session.

## MODUS: Convergence Sweep Tasten

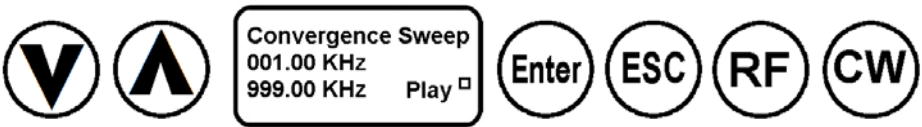

► ENTER: Wiedergabe: Wenn PLAY auf dem Bildschirm erscheint, ist Geräteausgabe eingeschaltet und das (ON) –Lämpchen leuchtet. Fast alle anderen Tasten sind im Wiedergabemodus gesperrt. Sie können die Bänder befestigen und mit der Behandlung beginnen. Die auf dem Display angezeigte Frequenz wird an die Bänder abgegeben

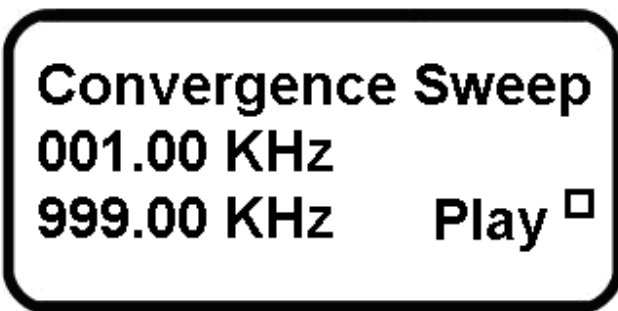

► Pause: Drücken Sie ENTER erneut um in das PAUSE-Programm zu Wechseln. Hierdurch werden auch die zuvor blockierten Tasten entsperrt

▶ ESC: Drücken Sie die ESC Taste um aus dem Pauseprogramm wieder in das vorherige Menü zu wechseln

▶ Carrier Wave (CW) und Radio Frequency (RF)  
Diese sind im PLAY-Modus umschaltbar. (HOT SWAP)  
Siehe Seite 34 - 35 für weitere Informationen zu CW & RF

## 25er Gruppe: Auswahl im MENÜ

▶ Nutzen Sie die Pfeiltasten um das Menü auszuwählen



▶ Das Gerät (Menü) startet bei Gruppe #1



- ▶ Verfügbare voreinstellte Gruppen reichen von #1 - #20 Jede Gruppe beinhaltet 10 Frequenzen
- ▶ Gruppe #21 - #25 sind unbeschrieben. Hier können Sie Ihre eigene Frequenzauswahl eingeben.
- ▶ Es ist möglich, ALLE Gruppen von # 1 - # 25 zu löschen, falls Sie mehr als fünf der programmierbaren Gruppen benötigen

## **Gruppenauswahl und Befehle**

- ▶ Wenn Sie Ihre Gruppe # 1 - # 25 mit der Taste ▲ UP und ▼ DOWN ausgewählt haben, drücken Sie ENTER



## **Befehlsfunktion für die Gruppen steht jetzt zur Verfügung:**

▶ **RUN:** Führt eine einzelne Frequenz an Position # 0 in der aktuell ausgewählten Gruppe aus.

Weitere Informationen zu RUN finden Sie auf Seite 20-22

▶ **Pulsausführung:** Führt eine einzelne Frequenz an Position # 0 auf der aktuell ausgewählten Gruppe Pulsing ON und OFF

Weitere Informationen zur Pulsausführung finden Sie auf Seite 23

▶ **SWEEP:** Führt die gesamten 10 Frequenzen # 0 - # 9 auf die aktuell ausgewählte Gruppe für einen Zeitraum von 10 Minuten pro Frequenz aus

Weitere Informationen zu SWEEP finden Sie auf Seite 24 - 26

► **PULSE SWEEP:** Führt die gesamten 10 Frequenzen # 0 - # 9 auf die aktuell ausgewählte Gruppe für einen Zeitraum von 10 Minuten pro Frequenz aus, jede Sekunde wird die Frequenz ein- und ausgeschaltet

Weitere Informationen zu PULSE SWEEP finden Sie auf Seite 27

► **PROGRAM:** Die aktuelle Gruppe neu programmieren


Weitere Informationen zu PROGRAM erhalten Sie auf den Seiten 28-31

## **Modus: RUN**

Mit der RUN-Funktion kann eine bestimmte Frequenz im Gerät wiederholt werden. Bei der Ausführung des RUN-Befehls wird eine vom Benutzer ausgewählte Frequenz aus einer Liste der 10 Frequenzen in der "Gruppe" wiederholt.

Da das Professional V3-Modell "25 Gruppen" enthält, hat der Benutzer die Möglichkeit, jede

einzelne Frequenz von jeder Gruppe auszuführen.

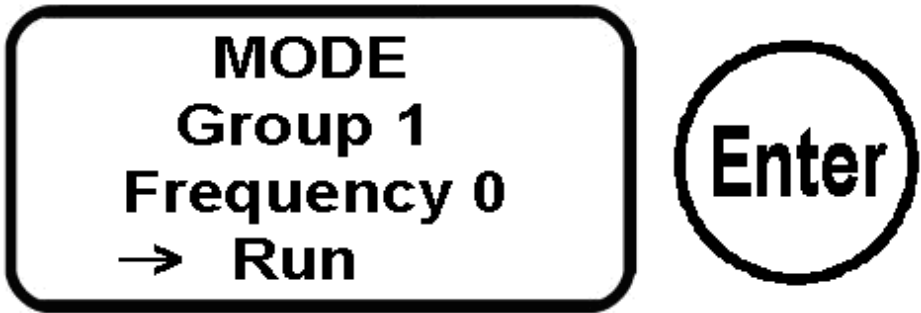

Nutzen Sie die Taste ▲ UP und ▼ DOWN, um eine einzelne Frequenz aus jeder Gruppe auszuwählen

Jede der 35000 Frequenzen in der ETDFL (Frequenzliste) kann sofort in das Gerät programmiert werden, sodass der Benutzer die aufgezeichnete Frequenz der Wahl zum gewünschten Zeitpunkt ausführen kann.

Der RUN-Befehl ist ein reiner "Manueller" Modus und hat keine voreingestellte Zeiteinstellung. Deshalb kann ein Benutzer den RUN-Befehl auswählen, um eine bestimmte Frequenz für eine eigens festgelegte Zeitspanne abzuspielen; für Stunden oder sogar Tage.

Sobald Sie ENTER gedrückt haben, wird die ausgewählte Gruppe sowie die Frequenzposition innerhalb dieser Gruppe angezeigt. Desweiteren ist die Nummer in KHZ zu sehen. PLAY zeigt die Ausgabe an. Wenn Sie erneut ENTER drücken, wird das Programm pausiert.


**Group 1**  
**Frequency 0**  
**→ Run**  
**001.01 KHz Play □**

### **Bemerkung:**

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Nutzer eher den SWEEP Modus anstatt des RUN-Modus wählen, da durch die Möglichkeiten zur Nutzung von mehreren Frequenzen im Automatic (Sweep) oder (Pulsed Sweep) Modus Krankheitsbilder effektiver behandelt werden können.



## Modus: Run (Wiedergabe) / Vorhandene Tasten

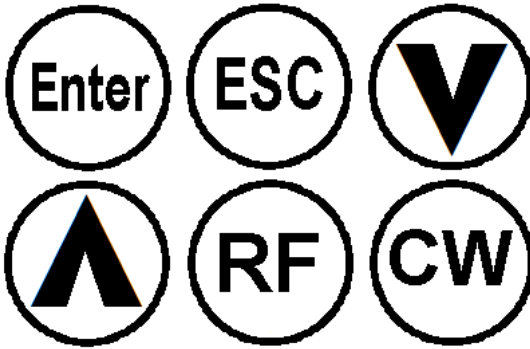

- ▶ **Wiedergabe:** Wenn PLAY auf dem Bildschirm erscheint, ist Geräteausgabe eingeschaltet und das (ON) –Lämpchen leuchtet. Fast alle anderen Tasten sind im Wiedergabemodus gesperrt. Sie können die Bänder befestigen und mit der Behandlung beginnen. Die auf dem Display angezeigte Frequenz wird an die Bänder abgegeben
- ▶ **Pause:** Drücken Sie ENTER um das Programm zu pausieren. Hierdurch werden auch die zuvor blockierten Tasten entsperrt
- ▶ **Nutzen Sie die Pfeiltasten** um im Pausenmodus eine andere Frequenz auszuwählen
- ▶ **ESC:** Rückkehr in das vorherige Menü. Auswahl funktioniert nur im Pausenmodus

► Carrier Wave (CW) und Radio Frequency (RF)  
Diese sind im PLAY-Modus umschaltbar. (HOT SWAP)  
Siehe Seite 34 - 35 für weitere Informationen zu CW & RF

## **MODE: Pulse Run**

Die Funktion Pulse Run ist identisch mit dem Run Modus, mit dem Unterschied, dass das Gerät jede Sekunde eine der Frequenzen abgibt. Der festgelegte „RUN“-Modus hingegen gibt keine zusätzlichen Impulse ab.

Das Pulse-Programm nutzt einen einzigartigen Prozessor, der die Energie in einer momentanen Off-Position "speichert" und "aufbaut", um anschließend diese gespeicherte Energie in einer kurzen Kehrbewegung wieder zurück dem Körper zu zuführen. Durch die Erhöhung der Wirksamkeit der Frequenzen und der Fokussierung der Wellenform kann die Energie tiefer in den Körper gelangen, was wiederum eine effizientere Heilbehandlung zur Folge hat.

Dr. Beck entdeckte diese Methode indem er eines seiner ursprünglichen Rife-Geräte konvertierte und die Moving Circuit Ausgabe durch einen Canon Camera Pulsed Flash ersetzte, den er zuvor aus einer alten Kamera entfernt hat. Dr. Beck stellte fest, dass die Behandlungen mit der gespeicherten Energie des Pulsed-Ausgang weitaus effektiver waren, als über die herkömmlichen Standard-Fix-Ausgabe-Methoden. Die gleichen Pulsmethoden werden in Ihrem Pro-Device mit modernster Mikrochip-Technologie eingesetzt.

► **Folgen Sie den Anweisungen zum RUN-Programm, um den Modus "Pulse RUN" zu verwenden. Pulse Run ist identisch mit dem RUN-Befehl, mit dem Unterschied, dass das Gerät jede Sekunde einen elektrischen Impuls abgibt.**

## **Modus: Sweep - Introduction**

Die Sweep-Funktion ist die zeitgesteuerte Wiedergabefunktion, die auf allen Original-ETD-Geräten vorhanden ist. Der "SWEEP" -Modus spielt alle 10 Minuten eine der 25 Gruppenfrequenzen ab.


Ein Frequenzsignal dauert 100 Minuten (1 Stunde 40 Minuten). Der Sweep-Modus wiederholt sich fortwährend bis er pausiert wird oder Sie mit Hilfe der ESC (Escape)-Taste zurück zum Menü gehen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Nachtbehandlungsprogramme ohne Pause einzustellen.

Sollten Sie eine kürzere Behandlungszeit im SWEEP-Modus wünschen, dann wählen Sie alternativ das Menüprogramm "Pulse-Sweep". Der Pulse-Sweep durchläuft die Gruppen-Preset-Frequenzen alle 20 - 30 Sekunden. Pulse-Sweep ist nur auf der Pro V3 Serie erhältlich.

Sweep hat sich traditionell als der effektivste Behandlungsmodus erwiesen. Er wird seit über 6 Jahren in ETD-Maschinen integriert und eingesetzt. Kundenfeedback hat bestätigt, dass sich der Original ETD Mode (Sweep) für alle Arten von Bedingungen bewährt hat.

## Modus: Sweep - Einführung:


Führt alle 10 Frequenzen innerhalb einer Gruppe aus, in der Sie die SWEEP-Funktion ausgewählt haben.

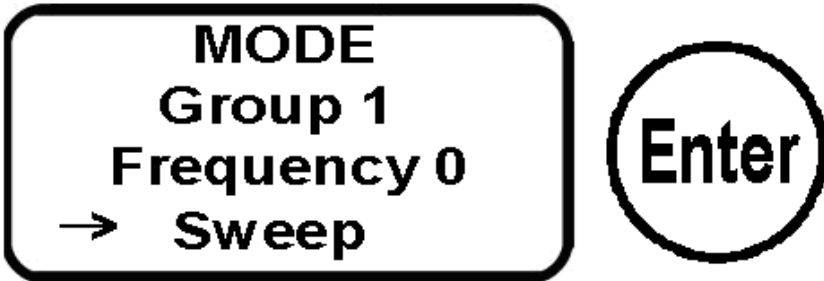

Sobald Sie ENTER gedrückt haben, wird die ausgewählte Gruppe angezeigt sowie die Frequenz innerhalb dieser Gruppe. Außerdem ist auch die Nummer in KHZ zu sehen. PLAY zeigt die Wiedergabe an. Wenn Sie erneut ENTER drücken, wird das Programm pausiert.

**Group 1**  
**Frequency 0**  
**→ Sweep**  
**001.01 KHz Play** □

## **Modus: Sweep (Wiedergabe) / Vorhandene Tasten**

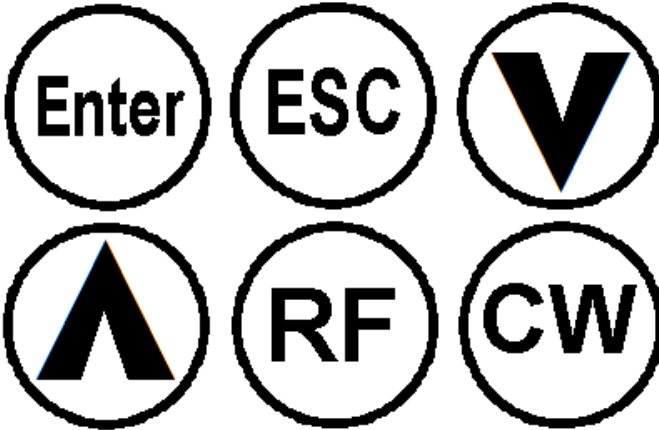

▶ **Play:** Wiedergabe: Wenn PLAY auf dem Bildschirm erscheint, ist Geräteausgabe eingeschaltet und das (ON) –Lämpchen leuchtet. Fast alle anderen Tasten sind im Wiedergabemodus gesperrt. Sie können die Bänder befestigen und mit der Behandlung beginnen. Die auf dem Display angezeigte Frequenz wird an die Bänder abgegeben

▶ **Pause:** Drücken Sie ENTER um das Programm zu pausieren. Hierdurch werden auch die zuvor blockierten Tasten entsperrt

▶ Nutzen Sie die Pfeiltasten um im Pausenmodus eine andere Frequenz auszuwählen

▶ ESC: Rückkehr in das vorherige Menü. Auswahl funktioniert nur im Pausenmodus

▶ Carrier Wave (CW) und Radio Frequency (RF)  
Diese sind im PLAY-Modus umschaltbar. (HOT SWAP)  
Siehe Seite 34 - 35 für weitere Informationen zu CW & RF

## **Modus: Pulse Sweep / Einführung**

Die Funktion Pulse Sweep ist identisch mit dem „SWEEP“ Modus, mit dem Unterschied, dass das Gerät jede Sekunde die 10 elektrischen Frequenzen der Gruppe abgibt. Bei der „Sweep“-Wiedergabe hingegen wiederholen sich die Frequenzen alle 10 Minuten.

Das Pulse-Programm nutzt einen einzigartigen Prozessor, der die Energie in einer momentanen Off-Position "speichert" und "aufbaut", um anschließend diese gespeicherte Energie in einer kurzen Kehrbewegung wieder zurück dem Körper zu zuführen. Durch die Erhöhung der Wirksamkeit der Frequenzen und der Fokussierung der Wellenform kann die Energie tiefer in den Körper gelangen, was wiederum eine effizientere Heilbehandlung zur Folge hat.

Dr. Beck entdeckte diese Methode indem er eines seiner ursprünglichen Rife-Geräte konvertierte und den Moving Circuit Output durch eine Canon Camera Pulsed Flash ersetzte, den er zuvor aus einer alten Kamera entfernt hat. Dr. Beck stellte fest, dass die

Behandlungen mit der gespeicherten Energie des Pulsed-Ausgang weitaus effektiver waren, als über die herkömmlichen Standard-Fix-Output-Methoden. Die gleichen Pulsmethoden werden in Ihrem Pro-Device mit modernster Mikrochip-Technologie eingesetzt.

► **Folgen Sie den Anweisungen zum SWEEP-Programm, um den Modus "Pulse SWEEP" zu verwenden. Pulse Sweep ist identisch mit dem Sweep-Befehl, mit dem Unterschied, dass das Gerät jede Sekunde einen elektrischen Impuls abgibt**

## **Modus: Program**

► Nutzen Sie die ▼ ▲ - Tasten um von Gruppe 1 zu den Gruppen 21 - 25 zu gelangen



► Die Gruppen # 21 - # 25 sind unbeschriebene Gruppen ohne Voreinstellungen. Hier können Sie perfekt Ihre eigenen Programme speichern.



**MODE  
GROUP 21  
Frequency 0  
000.00 KHz**



▶ Drücken Sie ENTER auf Ihrem Gerät um die Gruppe # 21 auszuwählen. Sie können erkennen, das voreingestellte Frequent NULL beträgt

▶ Nutzen Sie die ▼▲ – Tasten um eine andere Frequenz auszuwählen, oder starten Sie einfach die Programmierung mit der Frequenz 0


▶ Drücken Sie ENTER um die voreingestellte Frequenz # 0 auszuwählen



▶ Nutzen Sie das Eingabefeld um Ihre Frequenz über dem voreigestellten Wert 000,00 einzugeben und drücken Sie ENTER zur Bestätigung



- ▶ In dem unteren Beispiel ersetzen wir 000.00 Khz durch die Frequenz 123.45 Khz

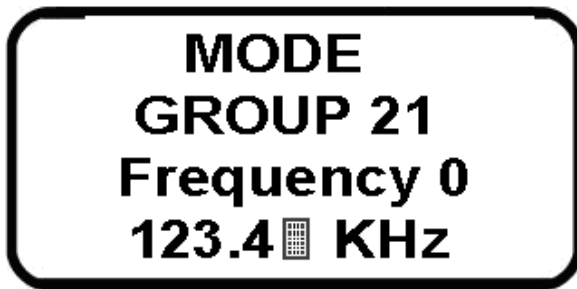

- ▶ Drücken Sie ENTER um die Beispielfrequenz 123.45 Khz festzulegen



**MODE**  
**GROUP 21**  
**Frequency 0**  
**123.45 KHz**

**Frequenz 0**: Blinkt nun auf

▶ Drücken Sie jetzt die ▲ – Taste um zur nächsten Frequenz zu gelangen: Frequency 1



**Frequency 1**: Kann nun programmiert werden

# Liste der 20 voreingestellten Gruppen

Gruppe 1 :

Arthritis, Rheumatismus und Osteoporose

Gruppe 2:

Asthma & Allergien allgemein

Gruppe 3:

sexuell übertragbare Erkrankungen allgemein

Gruppe 4:

Hepatitis A, B, C

Gruppe 5:

Zahnerkrankungen, Mundgesundheit allgemein

Gruppe 6:

umfasst Krebserkrankungen

Gruppe 7:

Metastasen/Krebs an den Organen allgemein

Gruppe 8:

Dr. Rifés spezialisierte MOR CW Häufigkeit

Gruppe 9:

Alzheimer und andere Demenz

Gruppe 10:  
bakterielle Infektionen (Erkältung & Grippe)

Gruppe 11:  
Viruserkrankungen allgemein

Gruppe 12:  
Hypertonie (hoher Blutdruck)

Gruppe 13:  
Herzkrankheit & chronische Lungenerkrankungen  
allgemein

Gruppe 15:  
Dr. Hulda Clark: parasitäre Erkrankungen allgemein

Gruppe 16:  
Brustkrebs

Gruppe 17:  
Hirnstörungen & Gehirnkrankheiten

Gruppe 18:  
Pilze (allgemein) und Symptome von Pilzerkrankungen

Gruppe 19:  
Schmerz, allgemein:

Gruppe 20:  
Belastungsstörungen (allgemein)

Gruppe 21 - 25: Gruppen durch Benutzer programmierbar

## Funktion: (RF) Radio Frequenz:



- ◀ Nutzen Sie die RF in jedem Wiedergabe-Modus.
- ◀ Wechselbarkeit zwischen RF und (CW) Träger Welle
- ◀ Wenn das  – Zeichen neben dem Wort Play erscheint, ist RF eingeschaltet

Die gesammelten Informationen zeigen, dass Dr. Rife's tatsächliche MORs, die eine Resonanz mit Organismen aufzeigen, diejenigen waren, die eine höheren Radiofrequenzen aufwiesen als solche, die durch die Kennedy Modelle 110, 281 und die Rife Ray # 4 Rife Geräten verwendet wurden. Außerdem weisen sie höhere harmonischen Frequenzen auf, als diejenigen, die das Beam Rays Clinical Rife Gerät verwendet. Alle Geräte von Dr. Rife basieren mit Radiofrequenzen anstatt Audiofrequenzen. Aufgrund der Spektralanalyse von Philip Hoylands Strahl-Rays-Rife-Gerät haben wir erfahren, dass Audio-Frequenzen ausschließlich verwendet wurden, um die Methode des Sideband-Oberschwingungsabstandes zu erreichen, und

hierdurch höheren harmonischen Frequenzen zu erhalten, die tatsächliche Funkfrequenz von M.O.R.s.

Henry Siner stellte durch mikroskopische Beobachtung fest, dass Philip Hoylands Erfindung die Organismen getötet hat. Viele weitere Ärzte, die die Instrumente verwendet haben, erklären, dass sie durch die Anwendung zahlreiche Krankheiten geheilt haben. Dies zeigt, dass Philip Hoylands harmonische Methode ohne Zweifel funktioniert.

## **Funktion: (CW) Carrier Wave:**



**Play X**

- ◀ Nutzen Sie die CW-Funktion in jedem beliebigen Wiedergabemodus
- ◀ Wechselbarkeit zwischen CW and (RF) Radiofrequenz
- ◀ Wenn ein X rechts neben PLAY erscheint, ist die CW-Funktion eingeschaltet.

Anhand von dokumentierten Informationen haben wir gezeigt, dass die original Beam Ray Clinical Instrumente mit (CW) Carrier Wave gearbeitet haben.

Das ETD Professional-Modell kann in einen Simulationsmodus des ursprünglichen Rife Beam Ray Gerätes mit der 3,3 Megahertz harmonischen Trägerfrequenz mit der Audio- (HF) Frequenzen kombiniert werden, die zusammen Seitenbandfrequenzen erzeugen.

Diese Seitenbandfrequenz richtet sich an die tatsächlichen Rife M. O.R Frequenz und devitalisiert harmlose Mikroorganismen und zerstört schädliche.

Der Carrier Wave war der Modus, der in dem Original Rife Gerät von Dr. Rife verwendet wurde, um seine 16 Patienten mit einem terminalen Zustand zu heilen

## **Rife Digital Professional V3 CPU Upgrade:**

The Rife Digital Professional V3 Running the CW (Carrier Wave) Selection, now operates as a representation of the two powerful Rife Machines, Numbered 110, and 281 respectively.

These technologies have also been transferred to the Zapper Digital Professional V3 model, so that the advances in Rife technologies, are also passed onto the Dr Clark PRO Model.



## **Rife Digital Professional V3 CPU Upgrade:**

Mit den neuesten Mikrochip-Technologien haben ETD Labs das Original Rife Gerät Modell 110 und das Rife Gerät Modell 281 Instruments miteinander verbunden, um gleichzeitig zwei High RF (Radio) Frequenzen ausgeben zu können.

Diese Innovation hat es zusätzlich ermöglicht, niedrige Audiofrequenzen ab 10 Hertz nach oben in eine hohe RF + Carrier Wave (CW) Frequenz zu modulieren, die aus dem Modell 281 stammte. Die Entwicklung hat über 6 Monate gedauert, um die beiden Rife Geräte mit Ultra zu kombinieren. Präzision mit den neuesten Microchip-Technologien und einzigartigen Programmieralgorithmen wurden hierbei verwendet

Der Rife Digital Professional V3, der die CW (Carrier Wave) Selection ausführt, dient nun als Repräsentant der beiden leistungsstarken Rife Geräte, Nummer 110 und 281.

Diese Technologien wurden auch auf das Zapper Digital Professional V3 Modell übertragen, so dass die Fortschritte in Rife Technologien auch auf das Dr Clark PRO Modell vorhanden ist.

## **FUNKTION: Master Reset:**



Verwenden Sie Master Reset, um die Frequenzen in allen Gruppen zu löschen und das Gerät auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Siehe Seite 32 - 33 für Werkseinstellungen.

- ▶ Master Reset setzt nur die 20 PRESET-Gruppen zurück auf die Werkseinstellungen (S. 32 - 33) und löscht alle Inhalte in den Gruppen 21 - 25 bis Null (0,00)
- ▶ Master Reset dauert 1 Sekunde
- ▶ Master Reset funktioniert nur bei der Erstinbetriebnahme MENU Funktion und wird nicht in MODE, RUN oder andere "Betriebsarten"
- ▶ Achten Sie darauf, dass Sie den Master Reset nicht versehentlich drücken, ansonsten müssen Sie die Frequenzen der gespeicherten Gruppen 20 - 25 über die Tastatur wieder in das Gerät eingeben.
- ▶ Verwenden Sie Master Reset, um Ihr Gerät wieder auf Englisch (Standard) Sprache und 17V Standardspannung zurückzusetzen

## Wichtige Fragen

F. Ist es besser CW oder RF zu benutzen?

Antworten:

Carrier Wave (CW) (Standardeinstellung) ist der beste Modus, weil er auf dem original Rife Beam Gerät basiert. RF wurde später auf die nachfolgenden Kennedy-Modelle und wurde als eine zweite Option betrachtet.

F, Wo sind die Frequenzen für die Programmierung meiner persönlichen Frequenzen im Gerät?

Antwort Die ETDFL (Frequenzen) finden Sie im letzten Abschnitt dieses Buches. Die Frequenzen sind in Englisch, da diese medizinischen Begriffe und Beschreibungen in vielen Sprachen verwendet werden.

F. Kann ich dieses Gerät mit einem externen 12v Auto oder Solar Akku verbinden?

Antworten. Die PRO V3 Serie benötigt 19V um zu funktionieren, wenn Sie eine Batterie verwenden, benötigen Sie einen 12V-19V Wechselrichter. In Wohnwagen und Wohnmobile können Sie den Netzadapter sicher in die Steckdose im Lieferwagen stecken. Der Adapter kann über die Steckdose in den USA (110v) oder anderen Ländern (220v, 230v, 240v) verwendet werden

Kontaktieren Sie [Healthproducts2@gmail.com](mailto:Healthproducts2@gmail.com) für externe Akku-Optionen

Der US-Store verfügt über ein Solar-Akku-tragbares Gerät, das die PRO V3-Serie aus dem Power Grid läuft

F. Können 2 Personen das Gerät benutzen?

Antwort: Ja, 2 Personen können das Gerät benutzen. Es gibt 2 Anschlüsse auf der Oberseite der Pro Series, den Anschluss für die jeweiligen Kabel für 2 Personen ermöglichen.

- Jedoch kann nur eine Gruppe gleichzeitig abgespielt werden
- Der Dual-Frequenz-Ausgang ist nur im Konvergenz-Sweep-Modus verfügbar

Programme für bis zu 25 Personen können auf dem Gerät gespeichert werden. Dies ist besonders für Kliniken von Vorteil, da die Programme für die Behandlung von bis zu 25 Patienten gespeichert werden können.

F. Wie lang ist die Garantie auf meinem professionellen ETD-Gerät?

Antwort: Die 12 monatige internationale Garantie deckt alle Länder ab, Rücksendegebühren gelten für Länder außerhalb von Großbritannien, USA, Australien

F. Gibt es Mengenrabatt oder oder kann man Vertriebspartner werden?

Antwort: Ja, Rabatte sind für große Mengen möglich.  
Vertreter in Ihrer Nähe: Kontaktdaten für Großbritannien, EU, USA und Japan sind auf der Rückseite.

F. Ich mag die Bänder nicht, hast du eine Alternative?

Antwort: Ja. Die "Latest Rife Healing Mat" ist eine einseitig leitfähige "Bett Matte", auf die Sie liegen können, ohne an Riemen und Drähten angeschlossen zu sein. Es ist eine ausgezeichnete Wahl bei Rückenschmerzen, und auch für alle

anderen Behandlungsprogramme. Die Matte ist im USA & UK Onlineshop erhältlich und kann direkt hier bestellt werden:

(USA)

[www.healthproducts2.com](http://www.healthproducts2.com) (Mat wird auf der Homepage angezeigt)

(VEREINIGTES KÖNIGREICH)

[www.rifedigital.net/order](http://www.rifedigital.net/order) ("Mat Pack" ist auf der Homepage angezeigt)

In USA wird Matte mit USPS (US) Postdienste versendet und welcher auch für andere Länder verfügbar ist. Die Rife Healing Mat kann nur an die Serie "PRO & PRO V3" angeschlossen werden.

In Großbritannien und der EU wird das "Mat Pack" mit Royal Mail, inklusive Tracking, versendet.

Q. Durch das Lesen des Dr Rife Journals, ich weiß, dass Dr. Rife Umhängegurte auf seinem 1940er Modell Rife Geräten verwendet, aber ich weiß auch, dass er ein Licht oder Lampe als Option für Behandlungen nutzt. Werden Sie eine solche Mampe in Zukunft auch für die Profi-Maschine verkaufen?

Antwort: ETD-Labore in Deutschland arbeiten momentan an einer Rife Lamp, die sich an das Rife Digital Professional Modell anschließen lässt. Dies ist ein fortlaufendes Projekt mit einem Zeitfenster von 2 Jahren, da die Übertragung von Frequenzen in Licht eine weitgehende Forschung benötigt. Wir erwarten eine Freigabe der Rife Lamp für die Jahre 2020 - 2022, zu diesem Zeitpunkt ist aber noch kein festes Datum bekannt.

Q. Ich brauche ein paar zusätzliche Riemen und Kabel, weil ich mit Patienten arbeite. Deshalb benötige ich zusätzliches Zubehör

Antworten:

- Klettbänder
- Flexible Riemen
- Extra führt
- Rife Heilmatten
- Solarbetriebener tragbarer Akku
- sind im US Onlineshop erhältlich und können direkt hier bestellt werden: [www.healthproducts2.com](http://www.healthproducts2.com) (Bänder auf der Home Page. Bänder sind für internationale Kunden erhältlich)

Für Großbritannien und EU, Welt:

- Rife Heilmatten
- können unter folgender Webadresse bestellt werden: [rifedigital.net/order](http://rifedigital.net/order) (oder email [rifedigitaluk@gmail.com](mailto:rifedigitaluk@gmail.com))

Japan

- Rife Heilmatten, Klettbänder, Leinen
- Kontakt über International Store

## **Behandlungsempfehlungen**

### **Generelle Empfehlungen:**

Wenn Sie neu sind zu dieser Therapieform oder wenn Sie Ihr ETG über einen längeren Zeitpunkt nicht verwendet haben, dann empfehlen wir mit den Behandlungen langsam anzufangen. Behandeln Sie im <SWEEP>-Modus zunächst nur einen Zyklus pro Tag, möglicherweise in 2 aufgeteilte Sitzungen (5 Frequenzen mit je 10 Minuten, ein paar Stunden Pause und dann die andern 5 Frequenzen).

Nach ein paar Tagen mit dieser eher vorsichtigen Behandlung, können Sie die Behandlungszeiten steigern zu 2 <SWEEP>-Zyklen pro Tag. Wenn Sie regelmässig mit dem Gerät arbeiten, können Sie die Behandlung auch über Nacht für 7-9 Stunden mit angelegten

Fussbändern beginnen. So schaffen Sie 3 bis 4 Zyklen quasi im Schlaf und werden sehr schnelle Behandlungserfolge spüren. Der Schlaf wird dabei in der Regel nicht gestört, ganz im Gegenteil, viele Nutzer beschreiben, dass sie sich viel klarer und wacher fühlen nach Nächten mit Elektrotherapiebehandlung.

Das ETD-Frequenzbuch listet tausende von Symptomen und Krankheiten auf und versieht diese mit jeweils den 10 passenden Frequenzen. Manchmal ist die Auswahl einfach, z.B. wenn man eine Erkältung hat dann programmiert man einfach das Programm für 'allgemeine Erkältung' und lässt das Gerät im <SWEEP-Modus laufen. Schwerwiegendere Krankheitssymptome erfordern allerdings oft individuellere 'Behandlungsformen'.

### **Die Behandlung allgemeiner Erkrankungen:**

Mit allgemeinen Behandlungen behandelt man z.B. Erkältungen oder Grippe, Candida oder Hautkrankheiten, Bakterien oder verschiedene virale Infektionen, um nur einige zu nennen. Allgemeine Behandlungen beziehen sich auch z.B. auf die Reinigung von Parasiten. Solche Erkrankungen können über einen Zeitraum von 21 bis 30 Tagen behandelt werden.

Für die allgemeine Reinigung von Parasiten empfehlen wir die Behandlung für:

Parasiten allgemein: Dr Clark (Voreinstellung # 15)

Programmieren Sie Ihr ETG mit allen Frequenz aus einem Set und behandeln Sie im <SWEEP>-Modus automatisch mit 10 Minuten pro Frequenz. Viele Menschen nutzen das ETG für die ersten 21 Tage einer Reinigung für 7-9 Stunden an den Füßen täglich, entweder über Nacht, oder während anderer Ruhezeiten. Befestigen Sie Bänder an beiden Fussohlen so, dass der Edelstahlknopf die Fußsohlen berührt. Programmieren Sie alle oben genannten Frequenzen und behandeln Sie über Nacht in einer endlosen Schleife, die sich alle 100 Minuten wiederholt.

Wenn Sie nicht wissen was Sie behandeln sollen, verwenden Sie einfach die Betriebseinstellungen, die in Ihrem ETG vorprogrammiert sind und verwenden Sie Ihr Gerät im <SWEEP>-Modus, gemäß den obigen Anweisungen.

## **Die Behandlung von schwerwiegenden Erkrankungen:**

Schwerwiegendere Krankheiten erfordern oft längere Behandlungszeiträume und bedürfen in der Regel einem gezielteren Behandlungsplan, der z.B. den Wechsel von Frequenzsets alle paar Wochen mit einschliessen kann. Unsere Geräte werden weltweit, bei Tausenden von Menschen erfolgreich gegen schwere Erkrankungen eingesetzt. Immer wieder haben die Ergebnisse gezeigt, dass lange Behandlungszeiten die besten Heilungsergebnisse produziert haben.

Lange Sitzungen sind einfacher in der Nacht durchzuführen, damit Tagesaktivitäten oder Arbeitszeiten nicht unterbrochen werden müssen. Eine Behandlung über Nacht mit den Bändern an den Füßen befestigt, ermöglicht eine wesentlich grössere Heilung, weil sie in der Lage ist tiefer in den Körper einzudringen und alle Organe zu erreichen. Zum Beispiel ist der Darm ein Organ, das durch frühere Elektrotherapiegeräte nicht erreicht werden konnte. Mit unseren ETG-en kann man Parasiten und Krankheitserreger sowohl im Darm als auch in anderen Organen wie der Leber, Galle, Magen beseitigen. Allerdings erfordert das ausgedehnte Behandlungszyklen mit Frequenzen, die möglichst eng mit den Frequenzen der Erreger oder Parasiten resonanzieren. Für diesen Zweck empfehlen wir den <SWEEP> Modus, der sich in einer Endlosschleife im 10-Minutenrhythmus automatisch durch die 10 Frequenzen arbeitet. Jede Frequenz resonanziert dabei mit dem Heilungsprogramm, um den spezifischen Krankheitszustand zu behandeln.

Da das ETG mit natürlichen Frequenzen arbeitet, erscheinen drei Monate Behandlungszeit ein plausibler Zeitraum zu sein, um das langsame Verschwinden der Symptome bei ernsteren Erkrankungen zu erreichen. Natürlicher Medizin arbeitet in der Regel auf verschiedenen, oft mehr subtileren Ebenen und die positiven Ergebnisse werden erst über einen längeren Zeitraum sichtbar. Aber nichts desto Trotz, Sie erhalten die besten Ergebnisse mit Behandlungszeiten vorzugsweise zu Ruhezeiten oder über ganze Nächte.



## Die Auswahl der Frequenzen

Falls Symptome haben, die sich nicht so ohne weiteres zuordnen lassen, gibt es verschiedene Methoden zur Auswahl Ihrer Behandlungssets:

- Zur Auswahl der richtigen Frequenzen oder Frequenz-Sets kann man kinesiologisch arbeiten (Muskeltests, die auf dem Prinzip beruhen, dass der Körper selbst schon weiss was ihm gut tut; man kann mit einem Kinesiologen arbeiten oder sich diese Technik für den Hausgebrauch selbst aneignen). Manche Menschen arbeiten mit dem Pendel, was ebenfalls leicht zu lernen ist.
- Es gibt Elektrotherapiegeräte, die auch sehr präzise Diagnoseprofile erstellen können. Man findet sie bei Homöopathen (Vega Gerät) oder in Naturheilpraxen (Bioresonanzgeräte). Diese Geräte bauen auf demselben Prinzip auf, nur, dass sie von einem völlig gesunden Organismus ausgehen und dann messen, wo Dissonanzen im Körper vorhanden sind. Sie können eine solche Praxis suchen und sich ein Diagnoseprofil erstellen lassen und sich dann selbst mit Ihrem Gerät behandeln.
- Die meisten Frequenzen gegen Krankheiten sind aufgelistet. Manchmal verändern sich medizinische Definitionen über die Zeit oder werden mit neuen Definitionen zusammengestellt. Falls Sie die gewünschte Erkrankung nicht finden, haben Sie vielleicht unter einem falschen Namen gesucht; z.B.: Hautkrebs finden Sie unter Krebs, Haut- oder Bandwürmer finden Sie unter Parasiten, Bandwürmer. Falls Sie Zweifel haben schreiben Sie bitte eine E-mail an unsere Kontaktadresse.
- Wenn Sie Ihr ETG regelmässig verwenden, hat dies noch einen weiteren Effekt: Sie lernen Ihren Körper besser kennen und einschätzen und Sie werden sehr viel sensibler und 'treffsicherer' mit Ihren Eigenbehandlungen. Sie werden in der Lage sein Ihre Erkrankung besser einzuschätzen und deshalb Ihre Behandlungen genauer zu wählen. Sie werden in der Lage sein die Frequenzen zu identifizieren, die Sie zu besserer Gesundheit führen und zu neuen Frequenzen überzugehen wenn notwendig.

## **Worauf müssen Sie bei der Behandlung achten?**

Sie können bei der Behandlung im Grunde nichts falsch machen; wenn Sie dem Körper z.B. eine Frequenz zuführen um einen Parasiten zu bekämpfen und Sie haben diesen Parasiten garnicht, dann verklingt diese elektrische Frequenz quasi ohne Effekt, aber auch ohne Schaden. Es gibt Forschungen darüber, dass Erreger in bestimmten Frequenzfeldern leben. Wenn sich bei Ihren Behandlungen diese Frequenzfelder mit den Frequenzfeldern anderer Erreger oder Parasiten mit ähnlichen Frequenzen überschneiden, dann wird diese Spezie mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls dezimiert oder abgetötet. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Frequenzsets zu verändern, wenn Sie nach längeren Behandlungen (5 Tage) gegen ein bestimmtes Krankheitssymptom keinerlei Veränderungen spüren.

## **Was bedeutet Herxheimer Reaktion?**

Bei der Elektrotherapiebehandlung werden v.a. am Anfang sehr viele Parasiten und Krankheitserreger abgetötet. Dies kann Ihr Eliminiertesystem überfordern und zu Übelkeit, Erschöpfung und Schwindel führen. Man nennt das den ‚Herxheimer Effekt‘, oder auch das ‚Parasite-Die-Off-Syndrom‘ (Parasitenabsterbesyndrom), eine Reaktion des Immunsystems auf freigesetzte Gifte in Blut und Gewebe. Durch die kurzzeitige Überforderung der Leber und der anderen Eliminiertesysteme verschlechtern sich Ihre Symptome sich erst einmal. Das kann für ein paar Stunden, aber auch bis zu 2/3 Tage anhalten, bevor Sie anfangen sich deutlich besser zu fühlen. Es ist wichtig zu wissen, dass die sich verschlechternden Symptome kein Scheitern der Behandlung bedeuten; in der Tat ist es genau das Gegenteil, nämlich der Beweis für eine sehr starke und effektive Entgiftung.

## **Was tun bei einer Herxheimer Reaktion?**

Das Wichtigste ist diese körperliche Reaktion, als einen Teil der Behandlung zu akzeptieren. Falls es sehr schlimm sein sollte, dann reduzieren Sie die Behandlungszeiten, trinken Sie viel Wasser (mindestens 4 L pro Tag) und ruhen Sie sich viel aus (keine sportliche Betätigung), essen Sie leicht um das Verdauungssystem nicht zusätzlich zu belasten, fügen Ihrem Trinkwasser frisch gepressten Zitronensaft bei und stellen Sie sicher, dass Ihre Verdauung gut

funktioniert (die Einnahme von Klaubersalz oder natürlichen Abführmitteln ist eventuell empfehlenswert). Pausieren Sie die Therapie bis Sie sich wieder besser fühlen.

## **Warnung**

- Im Falle von Schwangerschaft wird dringend davon abgeraten Elektrotherapiegeräte zu verwenden.
- Es wird empfohlen das Gerät nicht zu verwenden, wenn Sie mit einem Herzschrittmacher leben, allerdings gibt es bis heute keinerlei nachgewiesenen Gegenanzeigen.
- Achtung: wenn Sie mit Frequenzen in den Bandbreiten des Lactobazillus Acidophilus behandeln (346.05, 347.00, 348.00, 349.00, 350.00, 351.65, 352.00, 353.00, 354.00, 355.00) und dieses Bakterium damit dezimieren, kann dies bei manchen Menschen Candida auslösen. Falls Ihr Programm sich mit die Bandbreite der natürlichen Magen- und Darmflora überschneidet, dann ergänzen Sie Ihre Nahrung bitte täglich mit Probiotics (Lactobazillus). Lactobazillus ist auch in natürlichem Joghurt, Kefir und Kombucha enthalten.

## **Wichtiger Hinweis:**

Bei der Anwendung unserer Elektrotherapiegeräte kann es in seltenen Fällen zu einem leichten Prickeln auf der Haut kommen. Dies geschieht in der Regel nur bei der Verwendung der Bänder an sensitiven Hautstellen wie Bauch, Handgelenken oder anderen weichen Hautstellen. Dies können Sie vermeiden, wenn Sie die Bänder in Ihren Handflächen oder an den Sohlen Ihrer Füße anlegen.

Wenn Sie die Bänder trotz des prickelnden Gefühls längerfristig an sensitiven Hautstellen verwenden (wie z.B. Handgelenke), kann es zu einem lokalen Ausschlag kommen. Wenn Sie unbedingt an diesen Stellen behandeln wollen, dann verschieben Sie beim Auftreten des prickelnden Gefühls die Bänder bitte regelmässig alle paar Minuten.

Für langerdauernde Behandlungen können die Bänder am besten in der Handinnenfläche oder unter den Fußsohlen angelegt werden.

Sie können die Spannung auf Professional V3, von 17v auf 14.5v oder 12.5v herabsetzen, um bei Problemen der Überempfindlichkeit zu

reagieren. Die Spannung ist auf 17v voreingestellt. Dies ist die Voreinstellung für Rife Digital und sollte nicht geändert werden, weil genau die Spannungsstufe 17v die effektivste Krankheitbehandlung ermöglicht.

Reduzieren Sie die Spannung nur für/bei:

- ▶ Die Behandlung von kleinen Kindern
- ▶ hoher Sensibilität gegenüber elektronischer Frequenzen
- ▶ Sensibilität führt zu Rötungen und Hautausschlag
- ▶ Nutzen Sie eine Rife Healing Mat direct auf der Haut

Falls die Behandlung für einige Stunden durchgeführt werden soll (wie z.B. in der Nacht) wird empfohlen, die Bänder an der Fußsole anzulegen und zwar so, dass die Edelstahl-Knöpfe die Unterseite des Fußes berühren. Die Haut an dieser Stelle ist vergleichsweise dick und ist hierdurch auch für eine längere Elektrotherapie geeignet.

(Abbildung) Beispiel wie man am besten die Bänder am Fuß anlegt



### **Sicherheitshinweise für die Bedienung des ETG**

Wir möchten Sie darauf hinweisen, das Gerät auf eine feste Oberfläche zu stellen, wie ein Glasplatte, Holz Nachttisch oder auf dem Boden, wenn Sie Marmor oder ähnliche Flächen haben. Legen Sie das Gerät nicht das Bett, auf einen Teppichboden oder auf ein Kissen oder Kleidung. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn das grüne Licht an den Programmen 00.01 - 00.04 kHz zu blinken beginnt



Bei Verwendung der "Super Low Range" Frequenzen von 00.01 - 00.04 kann das grüne Licht blinken, da angezeigt wird, dass das Gerät

auf eine niedrige Frequenz eingestellt ist. Die sehr niedrigen Frequenzsets von 00.01 - 00.04 haben den effektivsten Entgiftungseffekt, und aus diesem Grund wurde eine Blinklichtanzeige eingebaut. So können Ärzte und Heilpflieger/innen den Heilungsverlauf besser kontrollieren.

Die niedrigen Entgiftungs-Sets können bei einigen Kunden leichte Herxheimer-Reaktionen hervorrufen. Diese Entgiftungsstrecke erlaubt eine rasche Beseitigung von Pathogenen und Bakterien im Körper, die bei einigen Menschen eine solche Reaktion verursachen können, wie z.B. ein kurzes Erkältungsgefühl, das nur selten mehr als ein paar Stunden dauert.

Dieses Gerät hat die Qualitätsprüfung für Langzeitbehandlungen erfolgreich durchlaufen.

**Technische Daten,**

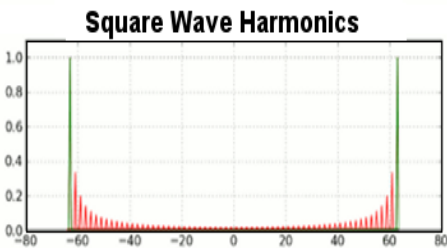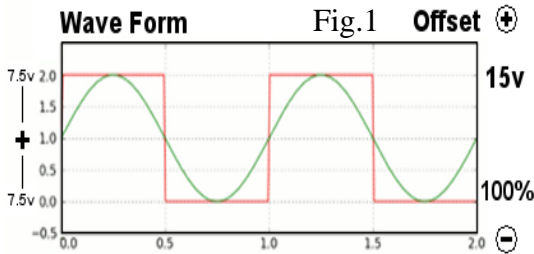

- Rechteckwelle Ausgang
- 17 Volt (Oscilloscope)
- 8.5 Volt (Multimeter)
- 100% Arbeitskreislauf
- DAC: Digitaler Analogumwandler
- Radiowellen
- CW Impedenz
- \* Auto. Wechsel zu SINE Wave-Funktion, nur möglich beim Gebrauch des Dr Rife Beam Ray LAMP Device

Laborgetestete harmonische periodische Wellenform für 100% der Frequenzen

Abt. 2

## **Digitale Analogumwandler (DAC)**

Digitale Frequenzen aus der direkten digitalen Synthese und digitaler Signalverarbeitung werden analog umgewandelt, bevor sie aus dem ETG übertragen werden. Diese Digital-Analog-Umwandler werden DAC genannt. Das ETG-Signal geht durch den DAC durchläuft dann einen Durchgangfilter um die Analog-Umwandlung zu beenden. Die Ausgangsfrequenz ist eine sehr genaue analoge Frequenz mit allen Obertönen und Untertönen dieser analogen Frequenz.

Die analogen Frequenzen, die von diesem digitalen Chip produziert werden, können mit mehr Genauigkeit nach oben oder unten schwingen, als die meisten Frequenz-Generatoren. Das Wichtigste ist, dass die Frequenz zu einer analogen Frequenz umgewandelt wird, bevor sie auf den Körper übertragen wird. Digital erzeugte Frequenzen, die zu analogen umgewandelt werden, sind die Genauesten. Nur wenn diese analogen Frequenzen dann zu Rechteckwellen umgewandelt werden, kann man die harmonische Rechteckwelle produzieren, wie sie in der Abbildung zu sehen sind (Abb. 2). Die Frequenzen werden unter Verwendung von Carrier-Wellenwiderständen auf einer einzigen Bandbreite erzeugt.

## **Wellenform**

Der gewählte Wellentyp ist die Rechteckwelle; sie ist die, zur Beseitigung von Krankheitserregern und Krankheiten, zuverlässigste und als effektiv getestete Wellenform. Die Einschaltdauer ist bei 50% bei dem Standard-Modell, und 10% bis 90% bei dem professionellen Modell mit Option zum Pulsmodus (Abb. 1). Der Wellentyp ändert sich zu einer Sine Welle, wenn der Beam Ray mit dem Rife Professional V3 genutzt wird. Dies geschieht im Ein lang mit der Geräteeigenschaften des Dr Rife Beam Ray.

## **Spannung und Stromstärke**

Wenn die Spannung am Ausgang mit einem Oszilloskop gemessen wird, dann werden die Oberseite der Rechteckwelle (7,5 V) mit der Unterseite des Rechteckwelle (7,5 V) addiert und damit die genaue Ausgangsspannung mit 15 V gemessen.

Eine Multimetermessung misst nur die Oberseite der Rechteckwelle und wird somit nur 7,5 V anzeigen. Die Messung erfolgt sofort und wird deshalb nicht den echten Messwert zeigen ( $7,5 + 7,5 = 15V$ ).

Beachten Sie also bitte, dass eine Multimetermessung des ETG-Ausgangs nur 50% der Gesamtleistung Ihres Geräts anzeigt. Diese Abweichung hat damit zu tun, dass Multimeter nicht in der Lage sind Volt-Messungen von Wellen durchzuführen. Im Zweifelsfall messen Sie die Ausgangsleistung Ihres ETGs bitte immer mit einem professionellen Oszilloskop. Der Ausgangsstrom von Ihrem Netzgerät ist 4500mA.

## **Harmonischen Frequenzen**

Frequenzen erzeugen Harmonieen, die sich in ihren Ausgangssequenzen innerhalb der der Welle von hoch zu niedrig und wieder zu hoch entwickeln (Abb.2). Diese Harmonieen einer Frequenz bestehen aus Obertönen und Untertönen dieser Frequenz. Bei einem Gerät wie Ihrem Elektrotherapie-Frequenzgenerator gehen diese Harmonien nach unendlich. Mit diesen Harmonieen werden Sie nicht nur von der heilenden Wirkung der Frequenz selbst profitieren, sondern Sie werden es dem Erreger auch unmöglich machen, sich der gegebenen Frequenz zu entziehen.

## **Einführung zur ETD-Frequenzliste**

Die überarbeitete Ausgabe der ETD-Frequenzliste, stellt den Nutzern unserer Elektrotherapiegeräte ein übersichtliches und umfangreiches Handbuch zur Verfügung, mit dem Sie Ihr Gerät für verschiedene Krankheiten und Symptome verwenden können.

Dieses Buch wurde unseren Gerät angepasst und die Angaben entsprechen den programmierbaren Frequenzen in Kiloherz (Khz).

## **Die Liste zu Geräten der Elektrotherapie, (© ETDFL Association)**

Dieses Buch wurde von medizinischen Forschern zusammengestellt, die das Dr Rife Professional V3 Gerät in Kombination mit dem Quantum SCIO Bioresonance Gerät genutzt haben. Sie sammelten ihre Notizen zu Frequenzbereiche für eine bestimmte Erkrankung, bei

der die Behandlung erfolgreich war. Diese wurden dann in dieser Liste gesammelt.

Frequenzen in diesem Buch spiegeln erfolgreiche Behandlungen durch die Benutzung von Elektrotherapiegeräten wieder. Zwar ist kann eine Heilung nicht immer garantiert werden, jedoch können Sie die Heilung vieler Erkrankungen unterstützen oder zumindest eine deutliche Verbesserung der Symptome ermöglichen. Viele parasitär verursachte Erkrankungen können durch die spezifischen Frequenz- Programme, die in der ETD-Frequenzliste genannt sind, behandelt und geheilt werden.

Die ETD Frequenzen sind in Kilohertz (KHz) angegeben. 1 KHz entspricht 1000 Hertz (Hz); z.B. 30 000 Hz = 30.00 KHz. Die Bandbreite Ihres Elektrotherapiegerätes reicht von 000.01 KHz bis zu 999.99KHz (ca.1 Megahertz, Mhz). Die Zusammenstellung wurde in eine Form gebracht, dass Sie die Frequenzsets direkt in Ihr ETG eingeben können.

## **ETDFL**

E.T.D.F.L ist ein laufendes Projekt von 12 Kliniken auf der ganzen Welt, die das Quantum SCIO Bioresonance Gerät verwenden. Diese haben sich zum Ziel gesetzt, die Krankheitsfrequenzen Patienten aufzuzeichnen und damit die 10 genauesten Frequenzen zu ermitteln, die für die Behandlung mit dem Royal Rife Gerät als am geeignetsten angesehen werden. Dieses Projekt begann im Jahr 2006, als die ursprüngliche CAFL-Häufigkeitsliste nicht weitergeführt wurde. Mit der ETDFL entstand eine neue Liste, die mittlerweile von mehr als 100.000 Royal Rife Benutzern auf der ganzen Welt verwendet wird. Die Genauigkeit der Frequenzen wird durch die vielen positiven Erfahrungen der Patienten bestätigt, die diese Frequenzliste in Kliniken und zu Hause verwenden.

ETDFL wird einmal jährlich aktualisiert. Aktuelle PDF-Versionen finden Sie unter: [ETDFL.com](http://ETDFL.com)



PDF-Versionen von ETDFL bei ETDFL.com können Sie die ETDFL-Datenbank für Krankheitsfrequenzen durchsuchen, die aktueller sein können als die in diesem Buch enthaltene Liste.

Dieses ETG ist lizenziert alle ETD Royal Rife Frequenzsets zu verwenden © 2020 - 2022 ETDFL Berlin Deutschland

### Rechtsbehelfserklärung

Der C.A.F.L. Verband übernimmt keine Garantien, dass die Royal Rife Frequenzen aus dieser Liste bestimmte Krankheit heilen werden. Die Auflistung ist eine Sammlung, zusammengestellt von medizinischem Fachpersonal, das mit Frequenzgeneratoren arbeitet. Die genannten Frequenzsets sind Zusammenstellungen aus Frequenzen, die für die spezifischen Erkrankungen erfolgreich eingesetzt wurden.

## INTERNATIONALER VERKAUF UND ANFRAGEN

### USA / KANADA / AUSTRALIEN / WELTWEIT

Verkauf und Service

(web) [www.rifedigital.com](http://www.rifedigital.com)

(E) [healthproducts2@gmail.com](mailto:healthproducts2@gmail.com)

USA ☎ 206-708-6408

International ☎ 0011-1-206-708-6408

Vereinigtes Königreich & Europäische Union,  
Osteuropa & Weltweit

London UK Store, Manager: Rosalie

(web) [www.rifedigital.net](http://www.rifedigital.net) (E) [rifedigitaluk@gmail.com](mailto:rifedigitaluk@gmail.com)

(web) [www.drclark.co.uk](http://www.drclark.co.uk) (E) [clarkzappersuk@gmail.com](mailto:clarkzappersuk@gmail.com)

UK ☎ 07376056374

International ☎ 0044 7376056374

**JAPAN:** この店舗の日本人顧客のみを対象とした大規模割引

ウェブサイト [rifedigital.jp](http://rifedigital.jp)

マネージャー ピーター・ウィリアムズ博士

Eメール [rifedigital@gmail.com](mailto:rifedigital@gmail.com)



© 2020-2022, *Electro Therapy Devices Berlin Germany*

© 2020-2022, *ETDFL Berlin Germany*

**Accessories Available at: ETDFL.COM**

**►Dr Rife Treatment Straps for Hands and Feet**

- Flex Straps:
- Velcro Straps:
- Wires (Button Cables):



**►Dr Rife Treatment Mats**

- 3M Conductive Rubber Mats (Rife Mat)



**►3M Conductive Rubber Belts (Rife Belt)**




**►Beamer.Tech Pulsed Electromagnetic Field Technology  
Beamer.Tech PEMF Full Body Treatment Mat ([www.beamer.tech](http://www.beamer.tech))**



**SMD Light Technology: Available at: [ETDFL.COM](http://ETDFL.COM)**

- ▶**Dr Rife Retyne™ Macular Degeneration Light Healing Mat**  
- For the treatment of over 25 Eye Diseases and Disorders.

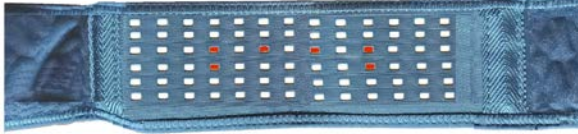

- ▶**Dr Rife Red LED Infrared Injury Healing MAT**  
- For the treatment of every type of Sprain and Injury.



- ▶**Dr Rife Culique™ Anti Aging Multiple IR Healing Mat**  
- For Anti-Ageing treatment, Skin Treatment and Hair Loss Treatment



►**Dr Rife Beam Ray™** Cancer Treatment Sinewave Modulated Digital Waveform Light Mat

